



Lösungsvarianten zum Sitzen

Viele Größen, verschiedene Bezüge für
unterschiedliche Gewichte und Anforderungen



aks-Antidekubitus Sitzkissen

Der Rollstuhl: Mobilität für Menschen mit Handicap

„Im Alltag von stark mobilitätseingeschränkten Menschen ist der Rollstuhl ein sehr nützliches Hilfsmittel. Er verhilft ihnen zu einem erhöhten Bewegungsradius und somit zu mehr Selbstständigkeit. Letzten Endes wird damit die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht.“

Der Rollstuhl überbrückt Behinderungen

In der Bundesrepublik Deutschland nutzen mehr als eineinhalb Millionen Menschen einen Rollstuhl - dauerhaft oder zeitweise. Diese Betroffenenengruppe besteht aus etwa gleichen Teilen von Senioren und Menschen mit körperlichen Behinderungen.“*

So unterschiedlich wie die Betroffenen selbst, sind auch Ihre Anforderungen und Erwartungen an den Rollstuhl und das Rollstuhlsitzkissen. aks hat deshalb kontinuierlich diesen Produktbereich ausgebaut und bietet heute eine breite Produktpalette. Mehr auf den nächsten Seiten.

*Quelle: *Stiftung MyHandicap gemeinnützige GmbH*



**PROPHY-
LAXE**

aks-maxisit

Die Basisversorgung für Risikopatienten

Dieses Schaumstoff-Würfelsitzkissen ist für die Versorgung von Rollstuhlfahrern geeignet, die mobil genug sind, sich immer wieder anders zu positionieren. Die richtige Stauchhärte des Kissens und die Würfelstruktur gewährleisten eine gleichbleibend gute Druckverteilung und geringe Scherkräfte. Sitzkissen inklusive Sitzkissenbezug inkoair®.

Patientengewicht 40-120 kg
Abmessung 42 x 42 x 9 cm
Dekubitusgrad Prophylaxe

HMV-Nummer
aks-maxisit - 11.11.01.3059

Bestellnummer
aks-maxisit - 04050



**PROPHY-
LAXE**

aks-multisit

Für Benutzer mit niedrigem Körpergewicht oder wenig Mobilität

Da diese Menschen eine Sitzfläche mit geringer Stauchhärte benötigen, wird bei diesem Rollstuhlsitzkissen eine Kombination aus entsprechenden Schaumstoffwürfeln und einer Wanne aus festem Schaumstoff eingesetzt. Die Wanne sorgt für die notwendige Unterstützung beim Sitzen. Zwei Mulden an der Vorderseite führen die Oberschenkel. Sitzkissen inklusive Sitzkissenbezug inkoair®.

Patientengewicht 40-90 kg
Abmessung 42 x 42 x 10 cm
Dekubitusgrad Prophylaxe

Bestellnummer
aks-multisit - 04350



aks-variosit I aks-variosit II

Zwei Varianten für Rollstuhlfahrer mit unterschiedlichen Gewichtsbereichen

Eine gute Druckverteilung muss auch bei unterschiedlichen Personengewichten ermöglicht sein. aks hat hierfür zwei Schaumstoffsitzkissen im Programm, mit denen diese Anforderung realisiert werden kann. Die einzeln herausnehmbaren Würfel sind so angeordnet, dass der Gesäßbereich druckentlastet und die Randzonen stabilisiert werden. Sitzkissen inklusive Sitzkissenbezug inkoair®.



Patientengewicht
aks-variosit I 40-70 kg
aks-variosit II 70-120 kg
Abmessung 42 x 42 x 9 cm
Dekubitusgrad Prophylaxe

**PROPHY-
LAXE**

HMV-Nummer
aks-variosit - 11.11.01.3060

Bestellnummern
variosit I - 04550
variosit II - 04551



aks-gelsit

Bewährt, robust, langlebig

**BIS
GRAD I
EPUAP**

Gelkissen genießen bei Rollstuhlfahrern mit Eigenbewegung eine hohe Beliebtheit. Sie zeichnen sich durch eine geringe Dicke aus und vergrößern so die Gesamtsitzhöhe nur unwesentlich. Sitzkissen inklusive Sitzkissenbezug inkoair®.

Patientengewicht 40-100 kg

Abmessungen 40 x 40 x 2,5 cm/42 x 45 x 2,5 cm

Dekubitusgrad bis einschließlich Grad I (nach EPUAP)


HMV-Nummer

aks-gelsit - 11.39.02.0009

Bestellnummern

40 x 40 x 2,5 cm - 04150


42 x 45 x 2,5 cm - 04151

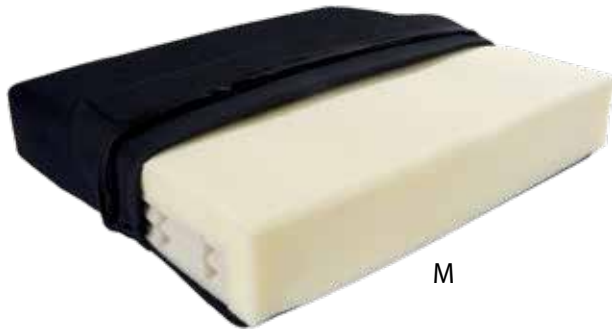

M

aks-viscosit

Antidekubitus-Schaumstoffsitzen mit einer Synergie aus viscoelastischem Schaumstoff und Schaumstofffeder-Technik

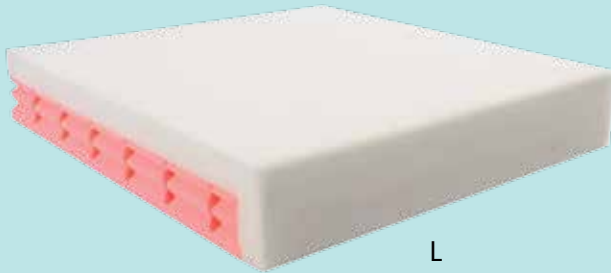

L



XL

Die Vorteile des aks-viscosit:

- durch die viscoelastische Oberschicht bildet sich eine individuell passende Sitzfläche.
- in Verbindung mit der innovativen Schaumstofffeder-Technik wird eine punktelastische Unterstützung beim Sitzen erreicht
- Druckspitzen werden effektiv reduziert
- der um die Vorderkante geführte viscoelastische Schaum reduziert die Gefahr von Druckstellen in der Kniekehle
- serienmäßiger 3D air Sitzkissenbezug sorgt für besseres Mikroklima (s. Abbildung oben Größe M)
- viele lieferbare Größen sorgen für eine problemlose Adaption an die verschiedensten Rollstühle
- 3 Gewichtsgebiete für die Versorgung von untergewichtigen bis übergewichtigen Personen
- zur Dekubitusprophylaxe und -therapie bis Grad II (nach EPUAP)

Option:

inkoair®-Sitzkissenbezug zum Schutz vor Eindringen von Flüssigkeiten

s. Preisliste und Tabelle Seite 91 f

Patientengewichte und Abmessungen:

s. Tabelle Seite 91 f





8 cm

aks-variosit 8 aks-variosit 10

Die zwei Schaumstoff-Würfelsitzkissen zur individuellen Versorgung im Rollstuhl




10 cm

Wir bieten zwei Sitzkissen mit unterschiedlichen Schaumstoffhöhen für verschiedene Patientengewichte an. Die beiden Sitzkissen sind sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch für die Dekubitustherapie bis einschließlich Grad IV nach EPUAP einsetzbar.

Die Vorteile der Sitzkissen aks-variosit 8 und aks-variosit 10:

- 5 x 5 cm große Schaumstoffwürfel ermöglichen eine vielseitige Anzahl an lieferbaren Sitzkissengrößen und somit eine individuelle Versorgung mit dem passenden Sitzkissen
- aks-variosit 8 und aks-variosit 10 bieten die Möglichkeit einer zusätzlichen Druckentlastung durch die gezielte Würfelentnahme auf der Unterseite.
- Die Herausnahme der 5 x 5 cm großen Schaumstoffwürfel ermöglicht eine zusätzliche, gezielte Druckentlastung durch quasi Hohllagerung am besonders gefährdeten Gesäßbereich, z. B. im Bereich der Sitzbeinhöcker.
- Anpassung der Sitzhaltung ist bei Patienten mit Körperfehlstellungen, z. B. Wirbelsäulenverkrümmung, oder Beckenschiefstand durch herausnehmbare Schaumstoffwürfel möglich
- Die äußeren Würfel sind für den unterstützenden Sitzkomfort mit der oberen Schaumstoffschicht verbunden. Zudem trägt das eingesetzte Gitter zur Stabilisierung bei und vereinfacht die Handhabung der Würfelentnahme
- Die beiden Kissen unterscheiden sich in der Gesamthöhe (8 cm/10 cm) und in der Auswahl der Schaumstoffkombinationen. Personen von 20 bis 80 kg Körpergewicht wählen aks-variosit 8, für Personen ab 70 bis 130 kg eignen sich die aks-variosit 10 Ausführungen.
- Der wasserundurchlässige inkoair®-Sitzkissenbezug bietet optimalen Schutz des Sitzkissens z. B. bei Patienten mit Inkontinenz.
- Als Option steht der 3D air-Sitzkissenbezug zur verbesserten Luftzirkulation zur Verfügung

**BIS
GRAD IV
EPUAP**

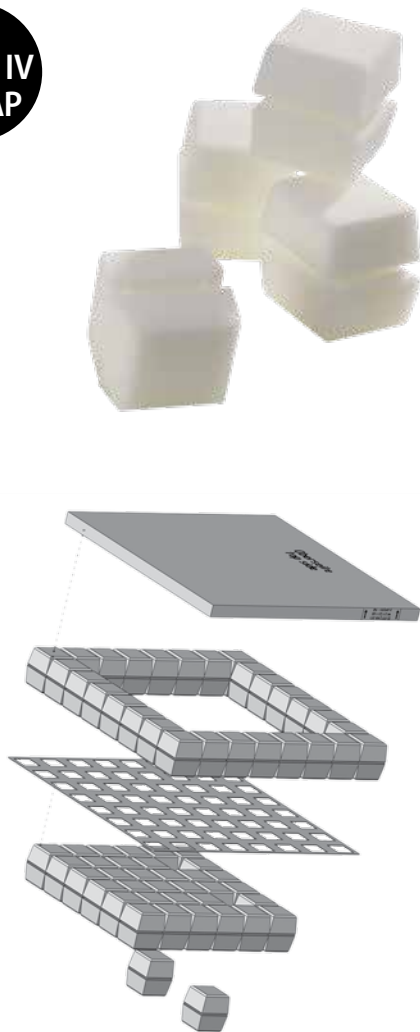

HMV-Nummer

aks-variosit 8 - 11.39.01.3013

aks-variosit 10 - 11.39.01.3012

Bestellnummern, Patientengewichte und Abmessungen auf Seite 91 f

Technische Daten Sitzkissen

Produkt	Höhe	Abmessung (B x T)	Sitzkissen-bezug	Unterbau	Patienten-gewicht	Dekubitusgrad nach EPUAP	HMV-Nr.	Bestellnr.
aks-maxisit	9,0 cm	42 x 42 cm	inkoair®		40 - 120 kg	Prophylaxe	11.11.01.3059	04050
aks-multisit	10,0 cm	42 x 42 cm		PU-Schaum-stoffwanne	40 - 90 kg	Prophylaxe		04350
aks-variosit I	9,0 cm	42 x 42 cm		Steckgitter	40 - 70 kg	Prophylaxe	11.11.01.3060	04550
aks-variosit II	9,0 cm	42 x 42 cm		Steckgitter	70 - 120 kg	Prophylaxe	11.11.01.3060	04551
aks-gelsit	2,5 cm	40 x 40 cm			40 - 100 kg	Grad I	11.39.02.0009	04150
aks-gelsit	2,5 cm	42 x 45 cm			40 - 100 kg	Grad I	11.39.02.0009	04151
aks-viscosit M	8,0 cm	40 x 40 cm	aks-3D air	Kaltschaum	20 - 50 kg	Grad II		40200
aks-viscosit M	8,0 cm	40 x 45 cm		Kaltschaum	20 - 50 kg	Grad II		40201
aks-viscosit M	8,0 cm	45 x 40 cm		Kaltschaum	20 - 50 kg	Grad II		40202
aks-viscosit M	8,0 cm	45 x 45 cm		Kaltschaum	20 - 50 kg	Grad II		40203
aks-viscosit L	8,0 cm	40 x 40 cm		PU-Schaum	50 - 100 kg	Grad II		40204
aks-viscosit L	8,0 cm	40 x 45 cm		PU-Schaum	50 - 100 kg	Grad II		40205
aks-viscosit L	8,0 cm	45 x 40 cm		PU-Schaum	50 - 100 kg	Grad II		40206
aks-viscosit L	8,0 cm	45 x 45 cm		PU-Schaum	50 - 100 kg	Grad II		40207
aks-viscosit L	8,0 cm	50 x 40 cm		PU-Schaum	50 - 100 kg	Grad II		40208
aks-viscosit L	8,0 cm	50 x 45 cm		PU-Schaum	50 - 100 kg	Grad II		40209
aks-viscosit L	8,0 cm	50 x 50 cm		PU-Schaum	50 - 100 kg	Grad II		40210
aks-viscosit XL	10,0 cm	50 x 40 cm		PU-Schaum	80 - 160 kg	Grad II		40211
aks-viscosit XL	10,0 cm	50 x 45 cm		PU-Schaum	80 - 160 kg	Grad II		40212
aks-viscosit XL	10,0 cm	50 x 50 cm		PU-Schaum	80 - 160 kg	Grad II		40213
aks-viscosit XL	10,0 cm	55 x 40 cm		PU-Schaum	80 - 160 kg	Grad II		40214
aks-viscosit XL	10,0 cm	55 x 45 cm		PU-Schaum	80 - 160 kg	Grad II		40215
aks-viscosit XL	10,0 cm	55 x 50 cm		PU-Schaum	80 - 160 kg	Grad II		40216
aks-variosit 8	8,0 cm	40 x 40 cm	inkoair®		20 - 80 kg	Grad IV	11.39.01.3013	40300
	8,0 cm	40 x 45 cm				Grad IV	11.39.01.3013	40301
	8,0 cm	45 x 45 cm				Grad IV	11.39.01.3013	40302
	8,0 cm	50 x 40 cm				Grad IV	11.39.01.3013	40303
	8,0 cm	50 x 45 cm				Grad IV	11.39.01.3013	40304
	8,0 cm	40 x 40 cm	aks-3D air			Grad IV		40320
	8,0 cm	40 x 45 cm				Grad IV		40321
	8,0 cm	45 x 45 cm				Grad IV		40322
	8,0 cm	50 x 40 cm				Grad IV		40323
	8,0 cm	50 x 45 cm				Grad IV		40324
aks-variosit 10	10,0 cm	40 x 40 cm	inkoair®		70 - 130 kg	Grad IV	11.39.01.3012	40311
	10,0 cm	40 x 45 cm				Grad IV	11.39.01.3012	40312
	10,0 cm	45 x 45 cm				Grad IV	11.39.01.3012	40313
	10,0 cm	50 x 40 cm				Grad IV	11.39.01.3012	40305
	10,0 cm	50 x 45 cm				Grad IV	11.39.01.3012	40306
	10,0 cm	50 x 50 cm				Grad IV	11.39.01.3012	40307
	10,0 cm	55 x 40 cm				Grad IV	11.39.01.3012	40308
	10,0 cm	55 x 45 cm				Grad IV	11.39.01.3012	40309
	10,0 cm	55 x 50 cm				Grad IV	11.39.01.3012	40310
	10,0 cm	40 x 40 cm	aks-3D air			Grad IV		40331
	10,0 cm	40 x 45 cm				Grad IV		40332
	10,0 cm	45 x 45 cm				Grad IV		40333
	10,0 cm	50 x 40 cm				Grad IV		40325
	10,0 cm	50 x 45 cm				Grad IV		40326
	10,0 cm	50 x 50 cm				Grad IV		40327
	10,0 cm	55 x 40 cm				Grad IV		40328
	10,0 cm	55 x 45 cm				Grad IV		40329
	10,0 cm	55 x 50 cm				Grad IV		40330

inkoair®-Sitzkissen-Ersatzbezüge	Abmessung (B x T x H)	Bestellnr.
für maxisit, multisit, variosit I/II	42 x 42 x 9/10 cm	40150
für aks-gelsit	40 x 40 x 2,5 cm	41160
für aks-gelsit	42 x 45 x 2,5 cm	41161

inkoair®-Sitzkissen-Ersatzbezüge	Abmessung (B x T x H)	Bestellnr.
für viscosit M, L, XL, variosit 8, 10		
	40 x 40 x 8 cm	49213
	40 x 45 x 8 cm	49214
	45 x 40 x 8 cm	49215
	45 x 45 x 8 cm	49216
	50 x 40 x 8 cm	49217
	50 x 45 x 8 cm	49218
	50 x 50 x 8 cm	49219
	50 x 40 x 10 cm	49220
	50 x 45 x 10 cm	49221
	50 x 50 x 10 cm	49222
	55 x 40 x 10 cm	49223
	55 x 45 x 10 cm	49224
	55 x 50 x 10 cm	49225

3D air-Sitzkissen-Ersatzbezüge	Abmessung (B x T x H)	Bestellnr.
für viscosit M, L, XL, variosit 8, 10		
	40 x 40 x 8 cm	49200
	40 x 45 x 8 cm	49201
	45 x 40 x 8 cm	49202
	45 x 45 x 8 cm	49203
	50 x 40 x 8 cm	49204
	50 x 45 x 8 cm	49205
	50 x 50 x 8 cm	49206
	50 x 40 x 10 cm	49207
	50 x 45 x 10 cm	49208
	50 x 50 x 10 cm	49209
	55 x 40 x 10 cm	49210
	55 x 45 x 10 cm	49211
	55 x 50 x 10 cm	49212