aks®



aks-Liftergurte

Transferlösungen für die Pflege zu Hause
und in Einrichtungen

aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH
Antwerpener Str. 6 | D-53842 Troisdorf | Telefon +49 2241 9474-0 | Fax +49 2241 9474-88 | aks@aks.de | **www.aks.de**

aks BV, Belgien
Grotestraat 314 | B-3850 Nieuwerkerken | Telefon +32 11 748382 | info.aksbv@aks.de | **www.aksbv.be**

aks pura GmbH
Biberweg 18 | D-53842 Troisdorf | Telefon +49 2241 9474-700 | Fax +49 2241 9474-788 | pura@aks-pura.de | **www.aks-pura.de**

Horcher GmbH
Philipp-Reis-Straße 3 | D-61130 Nidderau |Telefon +49 6187 9204-0 | Fax +49 6187 9204-15 | office@horcher.com | **www.horcher.com**


Unternehmen der gemeinnützigen Stiftung **EIN HERZ LACHT | www.einherzlacht.org**

@aks_gmbH

#aksgmbhtroisdorf

Stand: 10/2026 – Wir behalten uns Änderungen unserer Produkte sowie Farbabweichungen und Druckfehler vor.

Sehr geehrte Interessenten, sehr geehrte Kunden,

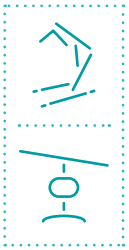

gerade halten Sie unsere Broschüre über aks-Liftergurte in Ihren Händen.

Wir möchten Ihnen eine informative und aussagekräftige Übersicht geben, so dass Sie anhand der Bilder und der Beschreibung den passenden Gurt für den Patienten und eine erfolgreiche Versorgung finden.

Unsere Gurte sind hochwertig verarbeitet, geprüft und bis 250 kg* maximal belastbar. Unsere Gurte für Hebelifter sind auch an unseren Deckenliftsystemen einsetzbar und für viele Lifter anderer Hersteller freigegeben. Beachten Sie hierzu unsere **Kompatibilitätserklärung**, diese finden Sie auf unserer Website unter Service/Downloads, dort liegen auch die **Gebrauchsanweisungen** zu den Liftergurten für Sie bereit.

Zum besseren Verständnis starten wir mit der Erklärung der eingesetzten Piktogramme, gefolgt von einer Übersicht der aks-Patientenlifter und dann geht es auch schon weiter mit den Liftergurten. Zum Schluss finden Sie noch u.a. eine Kurzanleitung zum Anlegen einen Liftergurtes, Tipps und einen Bestellbogen.

Bei Fragen zu unseren Produkten sind unser Innen- und Außendienst sowie unsere Fachhändler gerne für Sie da.

Ihr aks-Team

Qualität aus Deutschland!

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem zur Entwicklung, Herstellung und zum Vertrieb von Patientenlageruns- und Transporteinrichtungen und Zubehör.

Zertifiziertes QM System

DIN EN ISO 13485

*150 kg maximal bei aks- Aufrichtgurt für Aufstehlifter torneo® II und torneo® compact

Mobilität erhalten.

torneo® compact –
Der wendige Aufstehlifter von aks



Inhaltsverzeichnis Liftergurte

Mit aks in die Zukunft 06
Glossar Piktogramme 07

PATIENTENLIFTER
Aufstehlifter, 2-in-1 Lifter und Hebelifter 08-11
Lifterbügel und Waagen 12-13
Deckenliftsysteme 14

LIFTERGURTE
aks-Liftergurte – Materialien und Verarbeitung 16
Kompatibilität zu Liftern anderer Hersteller 17
Gesamtübersicht Liftergurte nach Einsatzbereichen 18-19

GURTE FÜR AUFSTEHLIFTER
Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aufstehlifter 20
Wadengurt für Aufstehlifter 20
Aufrichtgurt mit Brustschlaufe und Sitzschaukel für Aufstehlifter torneo® II und torneo® compact 21

GURTE FÜR HEBELIFTER
Standardgurt/Badegurt 22
Standardgurt ~/Badegurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze 23
Komfortgurt ~/Komfortbadegurt mit integrierter Kopfstütze 24
Badegurt mit Kopfstütze Flex 25
Aufrichtgurt (zwei Einzelgurte) 26
Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe/~ zum Baden 27
Hygienegurt 28
Hygienegurt mit Rückenverstärkung 29
Komfort-Hygienegurt 30
Universal-Komfortgurt 31
Universal-Netzgurt 32
Universalgurt Flex 33
Liegendtransportgurt für Tandembügel 34
Liegendtransportgurt für Transportbügel mit 8-Punktaufnahme/~ zum Baden 35
goliath® Gurt für XXL und Adipositas-Patienten 36
Kopfstütze und Verlängerungsschlaufen 37

NÜTZLICHES/TIPPS
Maßtabelle: Übersicht aller Liftergurtgrößen 38-39
SCHNELLKURS Liftergurt anlegen: Aufnahme im Sitzen – Aufnahme im Liegen 40
Richtige und falsche Sitzposition erkennen 41
SCHNELLKURS: Bestandteile Liftergurt – Gurtschlaufen einhängen 42
TIPPS: Beinschlaufen einhängen – Aufnahme vom Boden 43
Hygienische Aufbereitung und Desinfektion bei aks pura GmbH 44
Bestellbogen für fahrbare Patientenlifter und Liftergurte von aks 45-46



Mit aks in die Zukunft



aks Firmensitz in Troisdorf bei Köln/Bonn


Solarenergieanlage auf dem Dach des aks Firmensitzes

aks
aks Aktuelle Krankenpflege Systeme wurde 1988 gegründet und zählt heute zu den namhaften Herstellern von Hilfsmitteln für die Pflege in Deutschland und Europa. Am Unternehmensstandort in Troisdorf bei Köln/Bonn werden hochwertige Medizinprodukte für die professionelle und häusliche Pflege entwickelt und produziert. Die Produkte genießen bei Patienten, Pflegekräften, Sanitätsfachhändlern und Kostenträgern eine hohe Akzeptanz. Sie stehen für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und sind als Medizinprodukte ausschließlich über den Sanitätsfachhandel erhältlich.

aks pura
Die aks pura GmbH vereint drei Unternehmensbereiche unter einem Dach:
puratec ist Dienstleister für die hygienische Aufbereitung von Medizinprodukten.
puracare bietet Produkte rund um das Pflegebett.
purawell steht für Wohlfühlmatratzen und Kopfkissen für einen erholsamen Schlaf.

aks BV
Die Tochtergesellschaft aks BV mit Sitz in Nieuwerkerken, Belgien, vertreibt seit November 2020 das Produktsortiment der aks GmbH in den Beneluxländern und stärkt damit die Präsenz der Unternehmensgruppe auf dem europäischen Markt.

Horcher GmbH
Seit September 2024 ist die Horcher GmbH Teil der aks-Unternehmensfamilie. Das Unternehmen steht für hohe Qualitätsstandards und Innovationskraft und entwickelt sowie vertreibt Patientenlift- und Badesysteme. Die Betriebsstätte befindet sich in Nidderau bei Frankfurt am Main.

Nachhaltig in die Zukunft
Mit Investitionen in erneuerbare Energien leisten aks und aks pura einen Beitrag zum verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und zum Klimaschutz. Auf den Dächern beider Unternehmen in Troisdorf wurden Photovoltaikanlagen installiert.

Stiftung EIN HERZ LACHT
aks, aks BV, aks pura und Horcher sind Unternehmen der gemeinnützigen Stiftung EIN HERZ LACHT, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche engagiert. Ein fester Anteil der Gewinne der Unternehmen fließt in die Stiftung. Dadurch können langfristig soziale Projekte und Initiativen insbesondere im Großraum Köln und Troisdorf unterstützt werden.

Mehr erfahren Sie unter **www.einherzlacht.org**

Glossar Piktogramme

Die eingesetzten Piktogramme beschreiben an welchem Liftertyp (mobile Aufstehlifter/Hebelifter, Deckenlift) und mit welchem Hebearm/Transportbügel der Liftergurt eingesetzt werden darf.
Drei Piktogramme zeigen ob der Transfer bei diesem Gurt im Stehen (nur bei Aufstehlifter) oder im Sitzen und/oder Liegen (Hebelifter/Deckenlift) erfolgt. Andere Piktogramme zeigen, ob der Gurt aus Netzmaterial für den Nassbereich oder ob seine Verarbeitung/sein Schnitt für den Toilettengang, bei Amputationen oder für adipöse Patienten geeignet ist. Bei einigen Gurten ist das Ankletten der aks-Kopfstütze möglich, diese Gurte finden Sie über das passende Piktogramm, s.u.



Aufstehlifter, fahrbar



Hebelifter, fahrbar



Deckenlift



Gurt für Hebearm aktiv
für dualo® Aufstehlifter



Gurt für Hebearm aktiv
für Aufstehlifter torneo® II und torneo® compact



Gurt für Standardtransportbügel
an Hebelifter



Gurt für Tandembügel/goliath® Komfortbügel an Hebelifter



Gurt für Liegendtransportbügel
für 8-Punktaufnahme an Hebelifter



Transfer im Stehen



Transfer im Sitzen



Transfer im Liegen



Gurt für den Nassbereich



Gurt für den Toilettengang



Gurt auch bei Amputationen einsetzbar



Gurt für die Adipositas- und XXL-Versorgung



Gurt aus Polyesterstoff für den Trockenbereich



Gurt aus Netzstoff für den Nassbereich

Kopfstütze



Gurt mit aks-Kopfstütze verwendbar

Patientenlifter – Transferlösungen für die tägliche Pflege

Beispiel: torneo® II
Aufstehlift, fahrbar



Beispiel: foldy®
Hebelift, fahrbar



Beispiel: HeliQ
Deckenlift



Die drei Liftertypen

Wir bieten Patientenlifter für unterschiedliche Anforderungen: wie z.B. große und kleine Patienten, verschiedene Körpergewichte, für kleine und engere räumliche Gegebenheiten. Unsere Liftergurte wurden für unterschiedliche Krankheitsbilder, Konstitutionen, Körperbau und Pflegeanforderungen entwickelt. Gurte für den Trocken- oder Nassbereich, für den Transfer aus dem Bett, in den Stuhl, Rollstuhl oder für den Toilettengang.

Patientenlifter ermöglichen den Hilfs- und Pflegepersonen rückenschonende und kraftsparende Transfers und Pflege der Patienten.

Bei den fahrbaren Patientenliftern unterscheiden wir zwischen Aufsteh- und Hebelifter.

Aufstehlifter können bei Patienten mit einer guten Rumpf- und Nackenstabilität zum Aufrichten und zum Umsetzen im Stehen verwendet werden. Spezielle Aufrichtgurte für Aufstehlifter unterstützen und stabilisieren den Anhebevorgang und den Transfer. Die Aufnahme und das Absetzen erfolgt im Sitzen, der Transfer im Stehen.

Hebelifter/Standardlifter werden eingesetzt um immobile Patienten zu transferieren z. B. vom Bett in den Sessel oder vom Rollstuhl auf die Toilette. Für den Transfer werden sogenannte Gurte oder Tücher verwendet. Die Aufnahme des Patienten erfolgt im Sitzen oder Liegen, eine Aufnahme vom Boden ist ebenfalls möglich. Der Transfer erfolgt je nach Gurt sitzend oder liegend.
Wenn keine fahrbaren Hebelifter eingesetzt werden können, z.B. wegen räumlicher Gegebenheiten, bieten wir Deckenlift-Lösungen an.

Deckenlifter werden wie Hebelifter für Transfer und Pflege von Patienten eingesetzt**.** Hier können bis zu 300 kg Patientengewicht über Deckenschienen, einen Motor mit Transportbügel und Gurt bewegt werden. Der Motor ist die sogenannte Lifterkassette. Die aks-Liftergurte für Hebelifter können hier bis 250 kg eingesetzt werden.

Jeden Liftertyp gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Auf den folgenden Seiten finden Sie einen kurzen Überblick zum aks-Lifterprogramm.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Gesamtkatalog oder auf unserer Website **www.aks.de**

Die fahrbaren Aufstehlifter

torneo® II – Der Ergonomische

- optimale Kinematik, schonendes Aufrichten und Absetzen
- sicherer Transfer in stehender Position
- ideal zur Erhaltung der Restmobilität
- Einsatz in kleinen Räumen und bei schmalen Türen
- mechanische Spreizung des Fahrgestells per Fußhebel
- Maximallast 150 kg



torneo® II

torneo® compact – Der Wendige

- kompakte Maße und wendig auf kleinster Fläche (dreht auf der Stelle)
- sicherer Transfer in stehender Position
- Standmast und Hebearm in zwei Stufen einstellbar
- in der Höhe stufenlos verstellbare und in sich bewegliche Schienbeinstütze
- sechs Laufrollen
- Maximallast 150 kg



torneo® compact

dualo® – Der Wandelbare

dualo® – Aufstehlifter oder Hebelifter durch Umbausatz

- Wandelbarer Lifter: Aufstehlifter und Hebelifter in Einem durch entsprechendes Zubehör
- werkzeugloser Umbau vom Aufstehlifter zum Hebelifter und umgekehrt, durch einfache Steckfunktion
- zur Lagerung kann ein Hebearm in eine spezielle Halterung am Trittbrett aufgesteckt werden
- Nutzung der vielseitigen Funktionen eines Aufsteh- und/oder eines Hebelifters wie Aufrichten, Heben und Transferieren von Patienten
- ideal bei unterschiedlicher Mobilität oder für den Einsatz bei verschiedenen Patienten
- in kleinerer Größe mit geringeren Abmaßen als dualo® mini, in mittlerer Größe als dualo® oder in größerer, stabiler XL-Ausführung erhältlich
- mechanische Spreizung des Fahrgestells per Fußhebel
- optional elektrische Spreizung des Fahrgestells (dualo® e XL)
- Maximallast 150 kg bei dualo® mini und dualo® und 185 kg bei dualo® XL
- Wandladestation und Wechselakku sind als Zubehör erhältlich



dualo® mini aktiv
mit Hebearm aktiv
und Trittbrett



dualo® e XL aktiv
mit Hebearm aktiv
smart und
Trittbrett

dualo® aktiv – Aufstehlifter, fahrbar

- der dualo® wird durch Hebearm aktiv/aktiv smart und einem Trittbrett zum Aufstehlifter. Zusätzlich bieten wir optional das höhenverstellbare Trittbrett an, dass für die Aufnahme von kleinen Menschen, Menschen mit kurzen Unterschenkeln oder die Aufnahme von sehr hohen Sitzgelgenheiten konzipiert wurde.

@aks_gmbh
Umbau
dualo® XL

Die 2-in-1 Lifter



dualo® XL
mit Tandembügel

dualo® standard – Hebelifter, fahrbar

- Das Zubehör für den Umbau vom Aufstehlifter zum Hebelifter (und umgekehrt) kann optional erworben werden
- mit Hebearm standard und einem Transportbügel wird der dualo® aktiv zum Hebelifter dualo® standard
- es sind verschiedene Transportbügel wählbar: Standardtransportbügel, Tandembügel und nur für dualo®/XL/e XL der Liegendtransportbügel mit 8-Punkt-Aufnahme
- Waagen für den Einsatz am Hebelifter sind als Zubehör erhältlich



dualo® mini
Zubehör
zur Lagerung
aufgesteckt







Der dualo® aktiv Aufstehlifter kann werkzeuglos zum Hebelifter dualo® standard umgebaut werden und umgekehrt



foldo®
Hebe-/Badewannenlifter

foldo® – Der Einzigartige

- 2-in-1 Konzept: Hebe- und Badewannenlifter in einem Produkt vereint
- seitliches Schwenken für den Einsatz an der nicht unterfahrbaren Badewanne
- Sicherheit durch stabile Abstützung auf dem Wannenrand durch die Wannenauflage, den Teleskop-Ausleger und Sicherheitselektronik
- Absenken bis auf den Wannenboden
- erspart bauliche Veränderungen sowie separaten Badewannen-, Wand- oder Deckenlift
- mechanische Spreizung des Fahrgestells per Fußhebel
- Maximallast 130 kg



Wannenauflage

Sehen Sie den Transfer vom Rollstuhl in die Badewanne mit foldo® und aks-Badegurt auf YouTube.

Einfach QR-Code mit Smartphone oder Tablett über die Kamera und App scannen und dem Link zum Film auf der YouTube-Website folgen.
Liken Sie unser Video und abonnieren Sie unseren Kanal.

Die fahrbaren Hebelifter

foldy® – Das Original

- einfache, unkomplizierte Handhabung
- müheloses Transferieren sowie Aufnahme von Personen direkt vom Boden
- Standmast werkzeuglos auf das Fahrgestell faltbar
- niedrige Unterfahrhöhe, passend für aks-Pflegebetten
- mechanische Spreizung des Fahrgestells per Fußhebel
- optional elektrische Spreizung bei foldy® e mini, foldy® e und foldy® e XL
- Maximallast 150 kg bei foldy® und foldy® mini
- auch kleiner, als foldy® 130/kid/kid wählbar und foldy® micro mit einer Maximallast von 130 kg, oder größer, als foldy® XL mit einer Maximallast von 185 kg, erhältlich



foldy®

clino® II – Der Schnelle

- schneller Motor
- leichtgängige Rollen, wendiger Lifter, einfaches Schieben auch in kleinen Räumen
- ohne Werkzeug faltbar
- mühelose Aufnahme von Personen, auch vom Boden
- mechanische Spreizung des Fahrgestells per Fußhebel, optional elektrische Spreizung bei clino® e XL
- Maximallast 150 kg bei clino® II
- auch größer und stabiler für große und schwere Patienten als clino® XL bis 185 kg Maximallast erhältlich



clino® II

goliath® – Der Starke

- robuste und sichere Konstruktion mit steckbarem Standmast
- konzipiert für die Versorgung von sehr großen und schweren Patienten
- hochwertige Doppellaufrollen
- inklusive goliath® Komfortbügel mit Bügelpolsterung
- inklusive elektrischer Spreizung des Fahrgestells per Handbedienung
- maximale Tragfähigkeit 250 kg



goliath®

Bestellnummern finden Sie im Bestellbogen auf Seite 45.

Lifterbügel
Zubehör für fahrbare Hebelifter von aks



aks-Standardtransportbügel

für Liftergurte in Verbindung mit aks-Hebeliftern bestimmt, inklusive Bügelpolsterung:
bei foldy® 130/kid/kid wählbar, foldy® micro und foldo®, Maximallast 130 kg; bei foldy®/e/mini, dualo®/mini und clino® II, Maximallast: 150 kg und bei aks XL-Liftern, Maximallast 185 kg.




aks-Tandembügel

für ein breiter angelegtes Sitzen, für Liftergurte in Verbindung mit aks-Hebeliftern bestimmt, inklusive Bügelpolsterung:
bei foldy® 130/kid/kid wählbar, foldy® micro und foldo®, Maximallast 130 kg; bei foldy®/e/mini, dualo®/mini und clino® II, Maximallast: 150 kg; und aks XL-Liftern, Maximallast 185 kg.



aks-Bügelpolsterung

für alle aks-Standardtransportbügel und aks-Tandembügel.

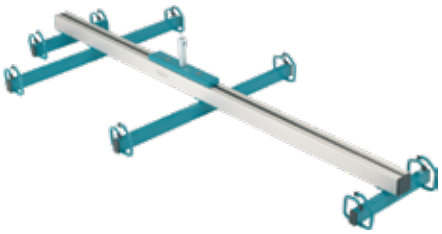

aks-Liegendtransportbügel mit 8-Punktaufnahme

für Liegendtransportgurte mit 8-Punktaufnahme in Verbindung mit aks-Hebeliftern bestimmt:
bei foldy®/e, dualo®, clino® II, Maximallast 150 kg;
bei foldy® XL,/e XL, clino® XL/e XL, dualo® XL/e XL,
Maximallast 185 kg und bei goliath® mit Maximallast: 250 kg.

Bestellnummern finden Sie im Bestellbogen auf Seite 45.

Waagen
Zubehör für fahrbare Hebelifter von aks

aks-dw 150

- max. Wägebereich: 150 kg
- einfache Handhabung
- flexibler Einsatz: mit Adapter für aks-Lifter nutzbar
- Display-Anzeige: Ablese in 500 g Schritten
- Energiesparfunktion: Selbstabschaltung nach ca. vier Minuten
- preiswerte Standardlösung zur Verlaufskontrolle
- kein Medizinprodukt



Waage mit Adapter (zwischen Lifter und Transport-bügel)

Sehen Sie auf YouTube wie man die Waage am Lifterbügel montiert.

aks-efw 200/300 – geeicht

- aks-efw 200 bis max. 200 kg Patientengewicht und aks-efw 300 bis max. 300 kg Patientengewicht
- ab Werk erstgeeicht, kalibriert und geprüft
- einfache Handhabung mit übersichtlichem Display
- Energiesparfunktion: Selbstabschaltung nach ca. drei Minuten
- BMI-Funktion
- Präzisionswaagen für aks-Hebelifter mit speziellem Adapter und inklusive Wägebügel (nicht für den Transfer!)



geeichte Waage mit Adapter und eigenem Wägebügel





Bestellnummern finden Sie im Bestellbogen auf Seite 45.

Die Deckenliftsysteme

Deckenlift



Mit dem Deckenlift-Programm können wir nahezu alle Anforderungen und Einsatzvarianten erfüllen, z.B. bei schwergewichtigen Patienten oder bei ungünstigen Raumsituationen. Ein umfassendes Programm macht es möglich:


- Lifterkassetten in 3 Ausführungen für Patientengewichte: **150/220/300 kg**
- Altair: **tragbare Lifterkassette**
- HeliQ: **Lifterkassette zum Verbleib in der Schiene**, auch mit **Fahrmotor** für das Verfahren der Kassette per Motor, statt manuelles Bewegen in der Schiene durch eine Hilfsperson
- Roomer S: Lifterkassette für den von **Raum zu Raum Transfer ohne Absetzen**
- verschiedene Schienensysteme
- **Rundum-sorglos-Paket**: vom Aufmaß über Montage bis zur Produkt-Einweisung und Abnahme vor Ort, sowie Wartung auf Anfrage



Altair



HeliQ

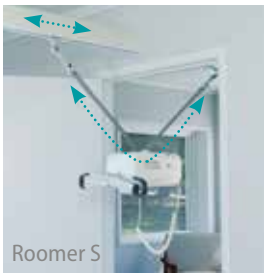

Roomer S



Roomer S



Altair an Deckenschiene



Altair an Freiständer

Rückenschonend arbeiten und sicher transferieren.

clino® XL –
Der schnelle Hebelifter von aks



Hochwertige Materialien und Verarbeitung für mehr Sicherheit



Gurt aus Polyesterstoff für den Trockenbereich




Netzstoff für den Nassbereich



Gurtschlaufen mit verschiedenfarbigen Gurtband



Zubehör: Verlängerungsschlaufen

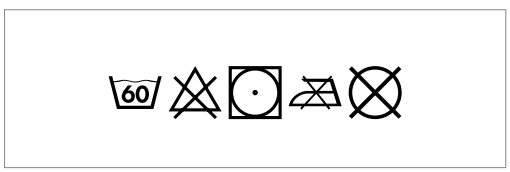

Waschanleitung für aks-Liftergurte

aks-Liftergurte

Liftergurte gehören zu den flexiblen Körperstützsystemen in der Grundversorgung und bei speziellen Anforderungen in der Pflege. Sie unterstützen den Anwender beim Heben und Transferieren des Patienten.

Zum Einsatz kommen verschiedene Materialien, unterschiedliche Schnittmuster und eine hochwertige Verarbeitung, um die täglichen Anforderungen in der Pflege sicher zu erfüllen:

- **Polyesterstoff** für den Einsatz im Trockenbereich
- **Netzstoff** aus Polyester, wasserdurchlässig und schnelltrocknend für den Einsatz im Nassbereich (Dusche, Bad)
- extrem reißfeste Gurtbänder
- **Polsterungen aus Schaumstoff**, um Druckspitzen bzw. ein Einschneiden des Liftergurtes in die Haut zu vermeiden und um den Körper des Patienten zusätzlich zu stützen
- Aluminiumleisten (herausnehmbar) zur **Rückenverstärkung** und Stabilisierung
- **verschiedenfarbiges Gurtband** zur Unterscheidung der Einhängebereiche der Gurtschlaufen, zur schnellen paarweisen Zuordnung der richtigen Position über die gleiche Farbe
- Gurte mit integrierter Rückenverstärkung und/oder Kopfstütze zur Unterstützung von Patienten mit wenig Kopf- und Nackenstabilität.
- separate, **anklettbare Kopfstütze** für den bedarfsgerechten Einsatz an bestimmten Gurten
- Hygienegurte, die so gearbeitet sind, dass der Patient gut freigemacht und auf die Toilette gesetzt werden kann.

aks-Liftergurte wurden sorgfältig geprüft, so dass **alle Gurte bis 250 kg Maximallast** für fahrbare Hebelifter und Deckenlifter verwendet werden können.*

Unsere Liftergurte sind bei **60 °C waschbar,** sie dürfen nicht mit Bleiche behandelt, nur schonend getrocknet (bei max. 60 °C), nicht gebügelt und nicht chemisch reinigigt werden.

In unserer Kompatibilitätserklärung erfahren Sie für welche Hebelifter von anderen Herstellern unsere Gurte geprüft und freigegeben sind (mehr dazu, siehe Seite 17).

*Beachten Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung des Liftergurtes und des Patientenlifters!

Verwendung von aks-Liftergurten an Patientenliftern anderer Hersteller

Kompatibilitätserklärung für aks-Liftergurte


Unsere Liftergurte für Hebelifter sind bei allen fahrbaren Hebeliftern und Deckenliftern von aks sowie bei bestimmten Liftern von anderen Herstellern einsetzbar.

Aus normativen Gründen dürfen nur der Hersteller des Körperstützsystems oder eine Organisation nach Kompatibilitätsprüfung eine Freigabe für eine Verwendung/Kombination mit einem Fremdlifter erteilen.

Wir bieten eine große Auswahl an Liftergurtlösungen und haben deshalb gründlich geprüft welche Kombinationen möglich sind.

Die Liste der geprüften und freigegebenen Hebelifter finden Sie online in unserer Kompatibilitätserklärung für Liftergurte auf unserer Website unter **www.aks.de/service/downloads** – oder direkt über den Link im QR-Code unten:

Einfach QR-Code mit Smartphone oder Tablett über die eingebaute Kamera und App scannen und dem Link zum PDF auf der aks-Website folgen.

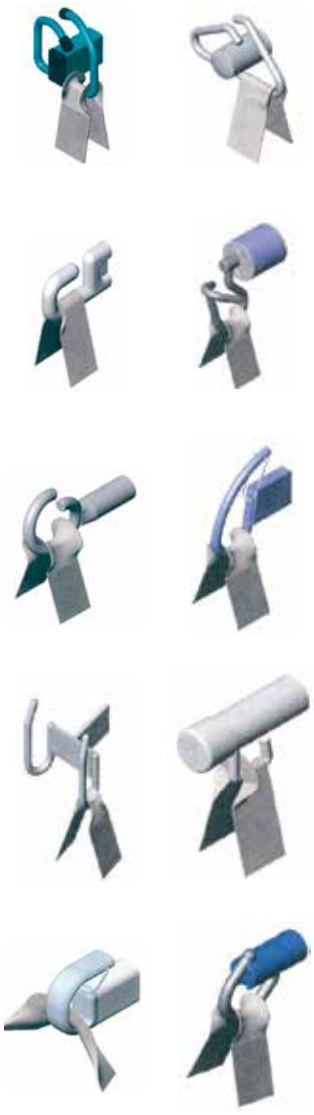

Gesamtübersicht
Liftergurte nach Einsatzbereichen

Gurte für Aufstehlifter



Aufrichtgurt mit Brustschlaufe
für Aufstehlifter (dualo®)



Wadengurt
für Aufstehlifter



Aufrichtgurt mit Brustschlaufe
und Sitzschaukel für torneo® II
und torneo® compact

Gurte für Hebelifter/Deckenlifter

Gurte für den Trockenbereich: Standard Transfer/ Toilettengang



Standardgurt



Standardgurt mit Rückenverstärkung u. integr. Kopfstütze



Komfortgurt mit
integrierter Kopfstütze



Aufrichtgurt (zwei Einzelgurte)



Schnelltransportgurt
mit Brustschlaufe



Hygienegurt



Hygienegurt mit
Rückenverstärkung



Komfort-Hygienegurt



Universal-Komfortgurt



goliath® Gurt
für die bariatrische Pflege

Gurte für den Nassbereich



Badegurt



Badegurt mit Rückenverstärkung u. integrierter Kopfstütze



Komfortbadegurt mit integrierter Kopfstütze



Badegurt mit Kopfstütze Flex



Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe zum Baden



Universal-Netzgurt



Universalgurt Flex

Gurte auch bei Beinamputationen einsetzbar



Universal-Komfortgurt



Universal-Netzgurt



Universalgurt Flex

Gurte für den Liegendtransfer



Universal-Netzgurt/ Universalgurt Flex



Liegendtransportgurt, Kopfstütze inklusive



Liegendtransportgurt f. Transportb. m. 8-Punktaufnahme



Liegendtransportgurt f. Tr. m. 8-Punktaufnahme zum Baden

aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aufstehlifter (dualo®)



dualo® aktiv
Aufstehlifter




aks-Aufrichtgurt mit
Brustschlaufe

Vom Rollstuhl ins Pflegebett
mit dualo® XL aktiv und
Aufrichtgurt mit Brustschlaufe

Dieser Gurt für Aufstehlifter unterstützt den Patienten beim Aufrichten/Absenken aus bzw. in eine sitzende Position. Die zusätzliche Brustschlaufe gibt dem Patienten während des Aufrichtens und Transfers ein sicheres Gefühl. Eine Polsterung im Achselbereich verhindert ein Einschneiden in den Achselhöhlen.
Der optionale aks-Wadengurt für Aufstehlifter sichert die Beine, gibt zusätzlichen Halt und unterstützt das Abdrücken mit beiden Beinen beim Aufrichten des mitwirkenden Patienten.

Transfer im Stehen	**mit Aufstehlifter** (dualo®)
Wadengurt	**optional**
Maximallast	**250 kg**

Gurtgrößen (Angaben in cm)	Größe	A	B	E	Brustschl.
Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aufstehlifter	S	87	27	16	114
	M	105	29	16	138
	L	120	29	16	147
	XL	141	29	16	167
	XXL	141	29	16	178
aks-Wadengurt	140	18	-	-	-

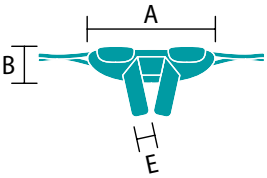

aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aufstehlifter
Bestellnummern
88781 - Größe S
88782 - Größe M
88783 - Größe L
88784 - Größe XL
88785 - Größe XXL



aks-Wadengurt für Aufstehlifter
(optional)
Bestellnummer - 88806



aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe und Sitzschaukel für Aufstehlifter torneo® II und torneo® compact





torneo® compact: 'Einpunkt oder Zweipunkt Einhängung für Gurtschlaufen



torneo® compact Aufstehlifter




torneo® II Aufstehlifter

Dieser Aufrichtgurt ist ausschließlich an den Aufstehliftern torneo® II und torneo® compact einsetzbar.
Der Aufrichtgurt mit Brustschlaufe ist um die Sitzschaukel erweitert, diese kann unter das Gesäß des Patienten positioniert werden, um die Haltung des Patienten beim Transfer zu unterstützen. Der Transfer kann, je nach Konstitution des Patienten, mit oder ohne Sitzschaukel erfolgen.
Das Wadenband, bereits inklusive bei torneo® II und torneo® compact, sichert die Position der Beine an der Schienbeinstütze, gibt zusätzlich Halt und unterstützt das Abdrücken mit den Beinen beim Aufrichten.

Transfer im Stehen	**mit torneo® II/torneo® compact**
Sitzschaukel	**inklusive**
Wadenband	**inklusive bei torneo® II/torneo® compact**
Maximallast	**150 kg**

Gurtgrößen (Angaben in cm)	Größe	A	B	E	Brustschl.
Aufrichtgurt mit Brustschlaufe und Sitzschaukel für Aufstehlifter torneo® II und torneo® compact	S	87	27	16	114
	M	105	29	16	138
	L	120	29	16	147
	XL	141	29	16	167
	XXL	141	29	16	178

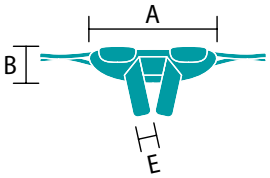

aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe und Sitzschaukel für Aufstehlifter torneo® II und torneo® compact
Bestellnummern
88800 - Größe S
88801 - Größe M
88802 - Größe L
88803 - Größe XL
88804 - Größe XXL
88805 - Ersatz Sitzschaukel
88810 - Ersatz Wadenband



Sehen Sie das Anlegen des Gurtes und den Transfer mit torneo® II und Aufrichtgurt mit Sitzschaukel

QR-Code mit Smartphone oder Tablett über die Kamera scannen und dem Link zum Film auf der YouTube-Website folgen.
Liken Sie unser Video und abonnieren Sie unseren Kanal.

aks-Standardgurt/ aks-Badegurt









Die **Griffschlaufe** an der Außenseite vereinfacht das Manövrieren des Patienten beim Transfer.


Voraussetzung für die Verwendung dieser beiden Gurte ist die Konstitution des Patienten. Er sollte im Nacken- und Schulterbereich stabil sein. Die Beinstützen sind, um einen faltenfreien Sitz mit hoher Druckminimierung an den Oberschenkeln zu ermöglichen, mit zusätzlichen Gewebeschichten gefertigt und mit einer Polsterung zur Verstärkung gesteppt. Hier wurde ein Schnittmuster für zwei Gurte aus jeweils verschiedenen Geweben, für unterschiedliche Einsatzbereiche, verwendet: Polyesterstoff für den Standardgurt für die täglichen Transfers im Trockenbereich und Netzstoff aus Polyester für den Badegurt und den Einsatz im Nassbereich.

Transfer im Sitzen mit	**Standardtransportbügel/Tandembügel**
für Aufnahme vom Boden	**geeignet**
Kopfstütze, anklettbar	**optional**
Griffschlaufen	**1**
Maximallast	**250 kg**

Gurtgrößen (Angaben in cm)	Größe	A	B	C	D	E
aks-Standardgurt/ aks-Badegurt	S	76	56	52	28	50
	M	89	56	60	30	59
	L	91	56	73	32	62
	XL	96	59	78	36	68
	XXL	104	64	81	44	80

Kopfstütze



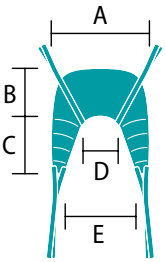

Zur Unterstützung des Kopf- und Nackenbereiches kann optional die **aks-Kopfstütze** eingesetzt werden. **Sie ist als Zubehör erhältlich.**





aks-Standardgurt
Bestellnummern
88700 - Größe S
88701 - Größe M
88702 - Größe L
88703 - Größe XL
88704 - Größe XXL
88798 - Kopfstütze (optional)



aks-Badegurt
Bestellnummern
88715 - Größe S
88716 - Größe M
88717 - Größe L
88718 - Größe XL
88719 - Größe XXL
88798 - Kopfstütze (optional)



aks-Standardgurt ~/aks-Badegurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze








Badegurt mit Rückverstärkung u. integ. Kopfstütze

Gurt mit Rückenverstärkung, die nahtlos in die Kopfstütze übergeht. Die Versteifungen aus Aluminium sind herausnehmbar und stützen Rücken- und Kopfbereich. Neben den Bein- und Schulterschlaufen bieten zusätzlich 4-fach verstellbare Kopfschlaufen die Möglichkeit den Gurt individuell an den Patienten anzupassen. Ein Netz im Gesäßbereich verhindert das Herausgleiten des Patienten. Der gesamte Körper wird stabilisiert und gestützt. Diesen Gurt gibt es in zwei verschiedenen Ausfertigungen, in Polyesterstoff für die täglichen Transfers und in Netzstoff für den Nassbereich.

Transfer im Sitzen mit	**Standardtransportbügel/Tandembügel**
für Aufnahme vom Boden	**geeignet**
Kopfstütze	**integriert**
Rückenverstärkung	**integriert**
Maximallast	**250 kg**

Gurtgrößen (Angaben in cm)	Größe	A	B	C	D	E
aks-Standardgurt ~/aks-Badegurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze	S	38	89	42	35	60
	M	40	103	65	50	74
	L	40	111/105	65	50	76

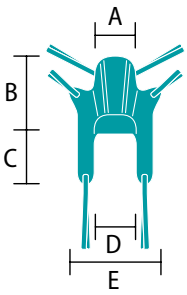

aks-Standardgurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze
Bestellnummern
88705 - Größe S
88706 - Größe M
88707 - Größe L



aks-Badegurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze
Bestellnummern
88720 - Größe S
88721 - Größe M
88722 - Größe L



aks-Komfortgurt mit integrierter Kopfstütze/ aks-Komfortbadegurt mit integrierter Kopfstütze








Komfortbade-gurt mit integ. Kopfstütze

Der eigens für Patienten mit wenig Stabilität im Rumpfbereich entwickelte Gurt bietet dem gesamten Körper eine komfortable Unterstützung. Das hohe Rückenteil, mit herausnehmbaren Versteifungen sowie die integrierte Kopfstütze, stützen Nacken und Rücken. Die eingearbeitete Polsterung in den Beinstützen erhöht den Sitzkomfort, insbesondere bei druckempfindlichen Patienten, durch einen faltenfreien Sitz. Mehrere Griffschlaufen an der Außenseite unterstützen beim Manövrieren des Patienten während des Transfervorgangs. Diesen Gurtschnitt gibt es in zwei Ausfertigungen: in Polyesterstoff für die täglichen Transfers im Trockenbereich und in wasserdurchlässigem und schnell trocknendem Netzstoff aus Polyester für den Nassbereich.

Transfer im Sitzen mit	**Standardtransportbügel/Tandembügel**
für Aufnahme vom Boden	**geeignet**
Kopfstütze	**integriert**
Griffschlaufen	**4**
Maximallast	**250 kg**

Gurtgrößen (Angaben in cm)	Größe	A	B	C	D	E
aks-Komfortgurt ~/ aks-Komfortbadegurt mit integrierter Kopfstütze	S	98	79	45	42	66
	M	122	89	46	46	74
	L	135	92	64	47	82
	XL	152	94	87	52	80
	XXL	164	100	108	56	70

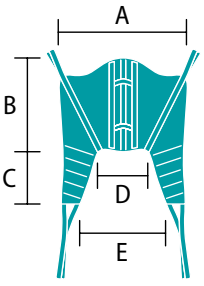

aks-Komfortgurt
mit integrierter Kopfstütze
Bestellnummern
88710 - Größe S
88711 - Größe M
88712 - Größe L
88713 - Größe XL
88714 - Größe XXL



aks-Komfortbadegurt
mit integrierter Kopfstütze
Bestellnummern
88725 - Größe S
88726 - Größe M
88727 - Größe L
88728 - Größe XL
88729 - Größe XXL



aks-Badegurt mit Kopfstütze Flex








Badegurt mit integrierter Kopfstütze, die nahtlos an den Rückenbereich anschließt. Patienten mit wenig Stabilität im Halsbereich können so schonend transferiert werden. Die anpassbare Positionierung der Kopfstütze erfolgt über die 4-fach verstellbaren Kopfschlaufen. Der Gurt besteht aus einem weichen, äußerst reißfesten Netzstoff, der kaum Wasser aufnimmt und schnell trocknet. Er eignet sich insbesondere für den Einsatz im Bad und Nassbereich. Die besonders breiten Beinstützen sind mit Schaumstoff gepolstert und gewährleisten einen faltenfreien Sitz mit hoher Druckminderung an den Oberschenkeln.

Transfer im Sitzen mit	**Standardtransportbügel/Tandembügel**
für Aufnahme vom Boden	**geeignet**
Kopfstütze	**integriert**
Maximallast	**250 kg**


Gurtgrößen (Angaben in cm)	Größe	A	B	C	D	E	F
aks-Badegurt mit Kopfstütze Flex	S	90	38	90	60	35	70
	M	95	40	105	65	40	85
	L	100	43	110	70	45	88
	XL	110	45	110	85	50	92
	XXL	120	45	115	100	50	96

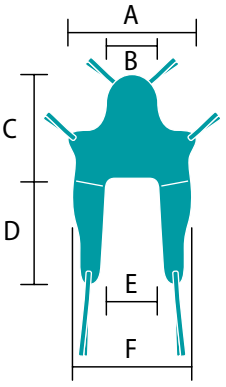

aks-Badegurt mit Kopfstütze Flex
Bestellnummern
88791 - Größe S
88792 - Größe M
88793 - Größe L
88794 - Größe XL
88795 - Größe XXL



aks-Aufrichtgurt (zwei Einzelgurte)

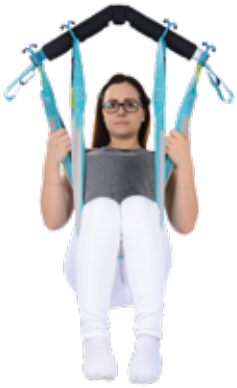






Der Aufrichtgurt für aks-Hebelifter besteht aus zwei einzelnen Gurten, einem Schultergurt und einem Beingurt, die jeweils mit zwei Schlaufen ausgestattet sind. Die Gurte sind gepolstert und bieten in der Mitte eine entsprechend vergrößerte Auflage zur besseren Druckverteilung an Rücken und Oberschenkeln. Die zwei Einzelgurte sind zudem mit einer rutschfesten Gummierung ausgestattet, diese bremst das Herausgleiten des Patienten aus dem Gurt. Der Aufrichtgurt eignet sich besonders für den schnellen Transfer von Patienten, die über genügend Muskelkraft vom Schulterbereich über Oberkörper bis hin zu den Oberschenkeln verfügen. Der Gurt zeichnet sich durch seine einfache Anwendung aus. Er fördert den Erhalt der Mobilität und wird auch gerne bei selbstständig durchgeführte Transfers mit einem Deckenlift genutzt.

Gurt für den Toilettengang	
Transfer im Sitzen mit	**Standardtransportbügel**
Zwei Einzelgurte	
Maximallast	**250 kg**

Gurtgrößen (Angaben in cm)	Größe	A	B
aks-Aufrichtgurt (zwei Einzelgurte)	M	110	17

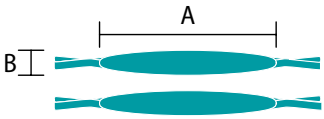

aks-Aufrichtgurt
Bestellnummer
88765 - Größe M



aks-Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe/ aks-Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe zum Baden








Schnelltrans-portgurt mit Brustschlaufe zum Baden

Diese Gurtmodelle haben einen sehr großen Ausschnitt im Gesäßbereich und schmale Beinstützen. Der Patient sollte im Nacken- und Schulterbereich stabil sein. Die Oberkante des Liftergurtes ist gepolstert und sorgt für einen angenehmen Sitz. Über die Brustschlaufe wird der Gurt am Oberkörper gesichert. Die Beinstützen sind mit einer zusätzlichen Gewebeschicht gefertigt, um einen faltenfreien und bequemen Sitz mit guter Druckverteilung zu gewährleisten. Die Griffschlaufe im Rückenbereich erleichtert das Manövrieren des Patienten beim Transfer. Der Schnitt beider Gurte ist ähnlich, sie unterscheiden sich maßgeblich im eingesetzten Material und der Breite der Beinstützen. Der Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe zum Baden ist aus Netzstoff und eignet sich speziell für die Anwendung im Nassbereich. Diese Ausführung besitzt breitere Beinstützen als der Gurt für den Trockenbereich. Beide Ausführungen sind für den Toilettengang geeignet.

Gurt für den Toilettengang	
Transfer im Sitzen mit	**Standardtransportbügel/Tandembügel**
für Aufnahme vom Boden	**geeignet**
Griffschlaufe	**1**
Maximallast	**250 kg**

Gurtgrößen (Angaben in cm)	Größe	A	B	C	D	Brustschl.
aks-Schnelltransportgurt	S	93	24	70	54/35	124
mit Brustschlaufe/	M	113	24	96	75/66	138
~ zum Baden	L	113	24	96	75/66	167

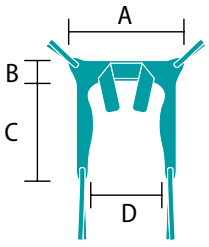

aks-Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe
Bestellnummern
88740 - Größe S
88741 - Größe M
88742 - Größe L



aks-Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe zum Baden
Bestellnummern
88771 - Größe S
88772 - Größe M
88773 - Größe L



aks-Hygienegurt








Der kompakte Zuschnitt und der große Ausschnitt im Gesäßbereich ermöglicht ein einfaches und schnelles Anlegen des Gurtes. Der Patient kann gut auf die Toilette gesetzt werden, da im Gesäßbereich der Unterkörper frei bleibt. Der Patient sollte im Nacken- und Schulterbereich stabil sein. Der Gurt ist im Achselbereich gepolstert. Eine Griffschlaufe im Rückenbereich erleichtert der Pflegekraft das Manövrieren des Patienten beim Transfervorgang.

Gurt für den Toilettengang	
Transfer im Sitzen mit	**Standardtransportbügel/Tandembügel**
für Aufnahme vom Boden	**geeignet**
Griffschlaufen	**1**
Maximallast	**250 kg**

Gurtgrößen (Angaben in cm)	Größe	A	B	C	D
aks-Hygienegurt	S	90	22	65	40
	M	97	22	71	44
	L	108	25	78	58
	XL	120	25	90	64
	XXL	130	27	110	74

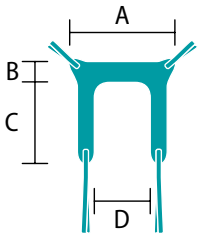

aks-Hygienegurt
Bestellnummern
88730 - Größe S
88731 - Größe M
88732 - Größe L
88733 - Größe XL
88734 - Größe XXL



aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung








Der Hygienegurt mit Rückenverstärkung besitzt einen höher geschnittenen und verstärkten Rücken. So wird der Patient stabilisiert und gestützt. Der Achselbereich ist gepolstert und sorgt zusätzlich für einen angenehmen Sitz im Gurt. Der Patient sollte jedoch im Nacken- und Schulterbereich stabil sein. Die spezielle Form der Beinstützen erleichtert die schnelle und sichere Aufnahme des Patienten. Durch den großen Ausschnitt im Gesäßbereich kann der Intimbereich des Patienten gut freigemacht werden – ideal für den Toilettengang. Eine Griffschlaufe im unteren Rückenbereich erleichtert das Positionieren des Patienten.

Gurt für den Toilettengang	
Transfer im Sitzen mit	**Standardtransportbügel/Tandembügel**
für Aufnahme vom Boden	**geeignet**
Rückenverstärkung	**integriert**
Griffschlaufen	**1**
Maximallast	**250 kg**

Gurtgrößen (Angaben in cm)	Größe	A1	A2	B1	B2	C	D
aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung	S	86	29	24	36	65	38
	M	96	33	26	40	69	47
	L	107	34	28	40	75	51
	XL	118	37	25	40	89	63
	XXL	128	47	26	45	107	68

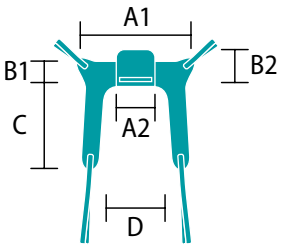

aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung
Bestellnummern
88786 - Größe S
88787 - Größe M
88788 - Größe L
88789 - Größe XL
88790 - Größe XXL



aks-Komfort-Hygienegurt








Die Weiterentwicklung des aks-Hygienegurts zum komfortablen Gurt für den Toilettengang. Dieser Gurt bietet noch mehr Unterstützung im Rückenbereich und mehr Sitzkomfort als der aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung. Er besitzt besonders breite, gepolsterte Beinstützen. Bei Bedarf kann zusätzlich eine Kopfstütze angebracht werden. Eine Griffschlaufe im oberen Rückenbereich erleichtert das Positionieren des Patienten.

Gurt für den Toilettengang	
Transfer im Sitzen mit	**Standardtransportbügel/Tandembügel**
für Aufnahme vom Boden	**geeignet**
Kopfstütze, anklettbar	**optional**
Griffschlaufen	**1**
Maximallast	**250 kg**

Gurtgrößen (Angaben in cm)	Größe	A	B	C	D	E
aks-Komfort-Hygienegurt	S	78	32	70	24	46
	M	88	39	77	28	58
	L	96	42	95	32	65
	XL	105	45	105	40	69
	XXL	115	45	120	49	73

Kopfstütze

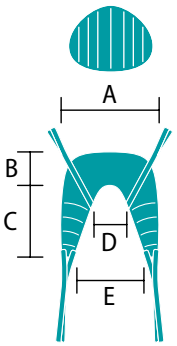

Zur Unterstützung des Kopf- und Nackenbereiches kann optional die **aks-Kopfstütze** eingesetzt werden. **Sie ist als Zubehör erhältlich.**



aks-Komfort-Hygienegurt
Bestellnummern
88735 - Größe S
88736 - Größe M
88737 - Größe L
88738 - Größe XL
88739 - Größe XXL
88798 - Kopfstütze (optional)



aks-Universal-Komfortgurt








Der Universal-Komfortgurt besteht aus flexiblem Gewebestoff, der sich dem Körper des Patienten anpasst. Dieser Gurt ist für eine Anwendung im Trockenbereich vorgesehen und ist auch für die Aufnahme von Patienten mit Beinamputationen geeignet. Im Kopf-/Schulterbereich ist eine Griffschlaufe zum Manövrieren des Patienten während des Transfervorganges.

bei Amputationen	**geeignet**
Transfer im Sitzen mit	**Standardtransportbügel/Tandembügel**
für Aufnahme vom Boden	**geeignet**
Griffschlaufen	**1**
Maximallast	**250 kg**

Gurtgrößen (Angaben in cm)	Größe	A	B	C	D
aks-Universal-Komfortgurt	M	84	100	85	45
	L	110	109	109	71
	XL	128	116	131	90
	XXL	152	114	151	109

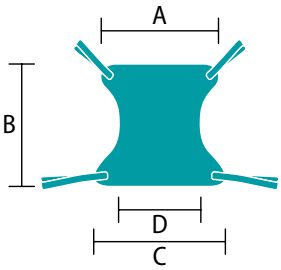

aks-Universal-Komfortgurt
Bestellnummern
88756 - Größe M
88757 - Größe L
88758 - Größe XL
88759 - Größe XXL



aks-Universal-Netzgurt








Der Universal-Netzgurt bietet viel Flexibilität: die Schulterschlaufen sind zur Erreichung der bestmöglichen Position 3-fach, die Beinschlaufen 4-fach verstellbar. Guter Sitzkomfort bei Verwendung des aks-Tandembügels (s. Bild). Vier Griffschlaufen am Gurt helfen beim Manövrieren des Patienten während des Transfervorgangs. Das einlagige Netzmaterial ist gut wasserdurchlässig und trocknet schnell, ideal für die Anwendungen im Nassbereich. Dieser Gurt ist in Verwendung mit dem Tandembügel auch zum Transfer im Liegen und auch für Patienten mit Beinamputationen geeignet.

bei Amputationen	geeignet
Transfer im Sitzen/Liegen mit	Standardtransportbügel/Tandembügel
für Aufnahme vom Boden	geeignet
Kopfstütze	integriert
Griffschlaufen	4
Maximallast	250 kg



Bodenaufnahme

Gurtgrößen (Angaben in cm)	Größe	A	B	C	D
aks-Universal-Netzgurt	S	110	126	107	56
	M	115	133	117	62
	L	130	140	129	68
	XL	145	145	144	83
	XXL	160	145	160	98

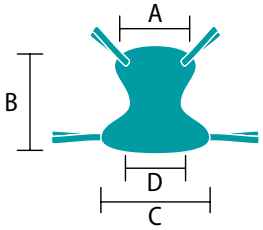

aks-Universal-Netzgurt
Bestellnummern
88760 - Größe S
88761 - Größe M
88762 - Größe L
88763 - Größe XL
88764 - Größe XXL





Gurt kann in Verbindung mit dem **aks-Tandembügel** auch für einen **Liegend-Transfer** eingesetzt werden

aks-Universalgurt Flex




Der Universalgurt Flex gleicht im Schnittmuster und der Verarbeitung dem Universal-Netzgurt. Nur wurden hier die Griffschlaufen weggelassen (bis auf eine oberhalb des Kopfes), so dass der Gurt eine Zeit unter dem Patienten verbleiben kann (z.B. im Rollstuhl/Sitzschale). Dadurch ist es nicht notwendig den Gurt direkt nach dem Transfer zu entfernen. Der Liftergurt ist aufgrund der Netzstruktur des Gewebes atmungsaktiv und bildet dadurch die Voraussetzung für die Reduzierung eines Wärmestaus.

bei Amputationen	**geeignet**
Transfer im Sitzen/Liegen mit	**Standardtransportbügel/Tandembügel**
für Aufnahme vom Boden	**geeignet**
Kopfstütze	**integriert**
Maximallast	**250 kg**



Bodenaufnahme

Gurtgrößen (Angaben in cm)	Größe	A	B	C	D
aks-Universalgurt Flex	S	110	126	107	56
	M	115	133	117	62
	L	130	140	129	68
	XL	145	145	144	83
	XXL	160	145	160	98

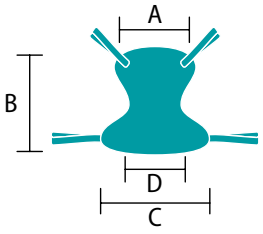

aks-Universalgurt Flex
Bestellnummern
88766 - Größe S
88767 - Größe M
88768 - Größe L
88769 - Größe XL
88770 - Größe XXL





Gurt kann in Verbindung mit dem **aks-Tandembügel** auch für einen **Liegend-Transfer** eingesetzt werden

aks-Liegendtransportgurt




Gurt nur mit **aks-Tandembügel** oder **goliath® Komfortbügel** verwenden

Mit diesem Gurt und dem aks-Tandembügel oder goliath® Komfortbügel können auch schwierige Transferprobleme gelöst werden. Selbst der Transfer von Patienten mit Hüft- oder Rückenproblemen sowie mit Amputationen unterhalb des Kniegelenks können hiermit problemlos durchgeführt werden. Die Beinstützen sind zusätzlich mit Schaumstoff gepolstert, so werden die Oberschenkel sicher und bequem gestützt. Die durch Klettband fixierbare Kopfstütze (inklusive) gibt zusätzlichen Halt.

Transfer im Liegen mit	Tandembügel/Komfortbügel
für Aufnahme vom Boden	geeignet
Kopfstütze, anklettbar	inklusive
Griffschlaufen	1
Maximallast	250 kg

Gurtgrößen (Angaben in cm)	Größe	A	B	C	D	E
aks-Liegendtransportgurt	M	86	60	103	31	77
	L	95	60	103	33	82
	XL	105	65	108	35	87
	XXL	115	65	108	37	95

Kopfstütze

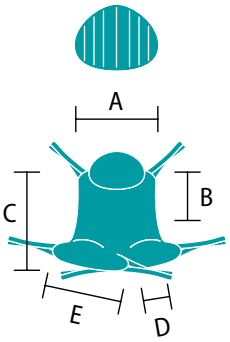

Zur Unterstützung des Kopf- und Nackenbereiches kann die **aks-Kopfstütze** eingesetzt werden. **Sie ist im Lieferumfang enthalten!**



aks-Liegendtransportgurt
Bestellnummern
88746 - Größe M
88747 - Größe L
88748 - Größe XL
88749 - Größe XXL
88798 - Kopfstütze (inklusive)





aks-Liegendtransportgurt für Transportbügel mit 8-Punktaufnahme*/~ zum Baden



Gurt nur für
aks-Transportbügel mit 8-Punktaufnahme

Griffschlaufe

Liegendtrans-portgurt f. T. m. 8-Punktaufn.



Liegendtransportgurt für Transportbügel mit 8-Punktaufnahme zum Baden

In Verbindung mit dem Liegendtransportbügel mit 8-Punktaufnahme garantiert dieser Gurt einen schonenden Transfer auch von Schmerzpatienten. Optional kann eine Kopfstütze per Klettband fixiert werden um zusätzlich Halt im Kopf- und Nackenbereich zu geben. Der aks-Liegendtransportgurt für Transportbügel mit 8-Punktaufnahme zum Baden aus Netzmaterial ist wasserdurchlässig, trocknet schnell und ist damit für den Einsatz im Nassbereich geeignet. Der aks-Liegendtransportgurt für Transportbügel mit 8-Punktaufnahme aus Polyesterstoff ist für den Trockenbereich vorgesehen.


Transfer im Liegen mit	Transportbügel mit 8-Punktaufnahme*
für Aufnahme vom Boden	geeignet
Kopfstütze, anklettbar	optional
Griffschlaufen	1
Maximallast	250 kg

Kopfstütze



Zur Unterstützung des Kopf- und Nackenbereiches kann optional die **aks-Kopfstütze** eingesetzt werden. **Sie ist als Zubehör erhältlich.**

Gurtgrößen (Angaben in cm)	Größe	A	B	C
aks-Liegendtransportgurt für Transportbügel mit 8-Punktaufnahme/ ~ zum Baden	M	66	183	46
	L	75	189	66
	XL	85	189	76
	XXL	100	189	81

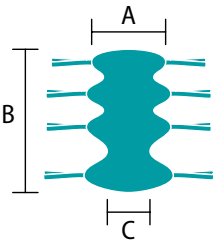



aks-Liegendtransportgurt f. Transportbügel mit 8-Punktaufnahme
Bestellnummern
88751 - Größe M
88752 - Größe L
88753 - Größe XL
88754 - Größe XXL
88798 - Kopfstütze (optional)



aks-Liegendtransportgurt f. Transportbügel mit 8-Punktaufnahme zum Baden
Bestellnummern
88777 - Größe M
88778 - Größe L
88779 - Größe XL
88780 - Größe XXL
88798 - Kopfstütze (optional)



* Dieser Gurt mit Transportbügel ist nicht an foldy® 130/kid/kid wählbar/micro/mini, foldo® und dualo® mini verwendbar!

goliath® Gurt

für die Versorgung von großen, schweren oder adipösen Patienten



Person
KI generiert


Gurt an **goliath® Komfortbügel**

Der verwendete Gewebestoff für goliath® Gurte passt sich gut dem Körper des Patienten an. Der Rückenbereich und die Beinstützen bieten eine zusätzliche Besonderheit, sie sind mit einem druckelastischen 3D-Textil gepolstert. Dieser hochwertige Gurt wurde für den Einsatz am goliath® Lifter für die Grundversorgung adipöser Menschen bis zu max. 250 kg Körpergewicht entwickelt.

Gurt für XXL-Versorgung	geeignet
Transfer im Sitzen/Liegen mit	Komfortbügel
für Aufnahme vom Boden	geeignet
Kopfstütze, anklettbar	optional
Griffschlaufen	1
Maximallast	250 kg

Gurtgrößen (Angaben in cm)	Größe	A	B	C	D	E
goliath® Gurt	A	112	68	94	50	70
	B	126	72	106	63	94
	C	140	76	120	78	102

Kopfstütze

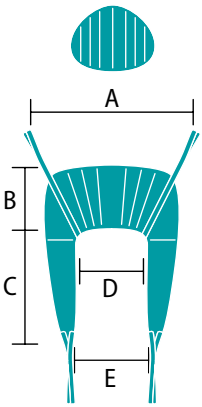

Zur Unterstützung des Kopf- und Nackenbereiches kann optional die **aks-Kopfstütze** eingesetzt werden. **Sie ist als Zubehör erhältlich.**



goliath® Gurt
Bestellnummern
88807 - Größe A
88808 - Größe B
88809 - Größe C
88798 - Kopfstütze (optional)





goliath® Komfortbügel
mit Bügelpolsterung, ist beim Hebelifter goliath® mit 250 kg Maximallast bereits inklusive.
Bestellnummer
89094 - goliath® Komfortbügel

Zubehör Liftergurte für Hebelifter

aks-Kopfstütze

Die aks-Kopfstütze ist an folgenden aks Gurten einsetzbar: Standardgurt, Badegurt, Komfort-Hygienegurt, Liegendtransportgurt, Liegendtransportgurt mit 8-Punktaufnahme/ ~ zum Baden und goliath® Gurt.

Verarbeitetes Flauschband an den oben genannten Gurten ermöglicht das Ankletten und Positionieren der Kopfstütze, durch angenähtes Klettband/Hakenband.

Bestellnummer - 88798



Kopfstütze



aks-Verlängerungsschlaufen

Die aks-Verlängerungsschlaufen ermöglichen eine Verlängerung der Gurtschlaufen von aks-Liftergurten, um den Gurt schnell und einfach an die Patienten anzupassen.
Sie bestehen aus extrem reißfestem Gurtband und sind einfach an den Gurtschlaufen zu befestigen. Sie sind für aks-Liftergurte an Hebeliftern vorgesehen!

Das können Sie mit den Verlängerungsschlaufen erreichen:
- Abstand des Patienten zum Lifterbügel vergrößern
- leichteres Einhängen der Gurtschlaufen
- Verlängerung der Beinschlaufen, um eine aufrechte Sitzposition zu erreichen oder um den Winkel der Sitzposition offener zu gestalten

Technische Daten
Länge gefaltet: 24 cm
Effektive Verlängerung, nach Befestigung am aks-Liftergurt ca. 18 cm
Verpackungseinheit: 2 Stück

Bestellnummer - 88796









Maßtabelle
Übersicht aller aks-Liftergurtgrößen


aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe
für Aufstehlifter/~ torneo® II/
torneo® compact

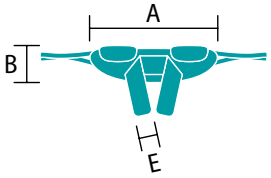


aks-Aufrichtgurt
(2 Einzelgurte)

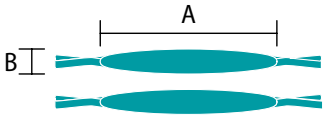


aks-Universal-Komfortgurt

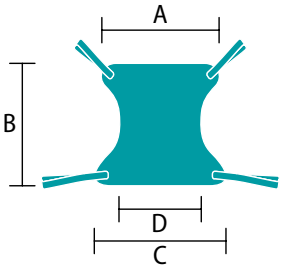


aks-Standardgurt/
aks-Badegurt

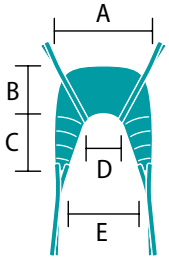


aks-Schnelltransportgurt mit
Brustschlaufe/~ zum Baden

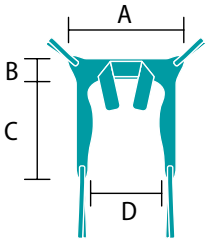


aks-Universal-Netzgurt/
aks-Universalgurt Flex

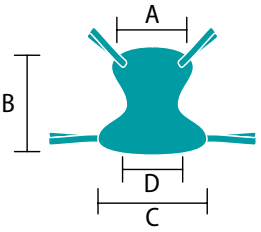


aks-Standardgurt ~/aks-Badegurt
mit int. Rückenverst. u. Kopfstütze

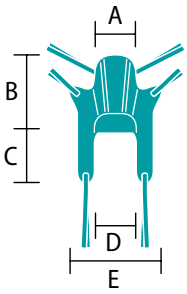


aks-Hygienegurt

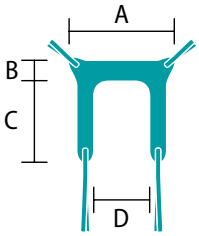


aks-Liegendtransportgurt

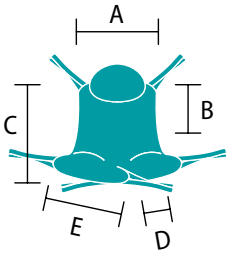


aks-Komfortgurt ~/Komfortbadegurt
mit integrierter Kopfstütze

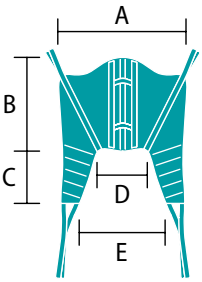


aks-Hygienegurt
mit Rückenverstärkung

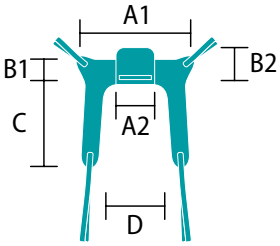


aks-Liegendtransportgurt für
Transportbügel
mit 8-Punktaufnahme/
~ zum Baden

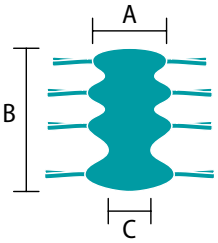


aks-Badegurt mit Kopfstütze Flex

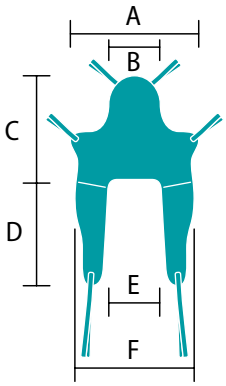

aks-Komfort-Hygienegurt

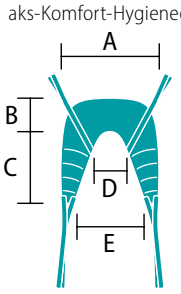


goliath® Gurt

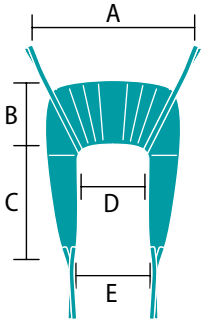

Alle Maßangaben in cm	A	B	C	D	E	F	Brustschlaufe
aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aufstehlifter/~ torneo®…, Größe S	87	27	-	-	16	-	114
aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aufstehlifter/~ torneo®…, Größe M	105	29	-	-	16	-	138
aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aufstehlifter/~ torneo®…, Größe L	120	29	-	-	16	-	147
aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aufstehlifter/~ torneo®…, Größe XL	141	29	-	-	16	-	167
aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aufstehlifter/~ torneo®…, Größe XXL	141	29	-	-	16	-	178
aks-Wadengurt	140	18	-	-	-		
aks-Standardgurt/aks-Badegurt, Größe S	76	56	52	28	50		
aks-Standardgurt/aks-Badegurt, Größe M	89	56	60	30	59		
aks-Standardgurt/aks-Badegurt, Größe L	91	56	73	32	62		
aks-Standardgurt/aks-Badegurt, Größe XL	96	59	78	36	68		
aks-Standardgurt/aks-Badegurt, Größe XXL	104	64	81	44	80		
aks-Standardgurt ~/aks-Badegurt m. Rückenv. u. int. Kopfst., Größe S	38	89	42	35	60		
aks-Standardgurt ~/aks-Badegurt m. Rückenv. u. int. Kopfst., Größe M	40	103	65	50	74		
aks-Standardgurt ~/aks-Badegurt m. Rückenv. u. int. Kopfst., Größe L	40	111/105	65	50	76		
aks-Badegurt mit Kopfstütze Flex, Größe S	90	38	90	60	35	70	
aks-Badegurt mit Kopfstütze Flex, Größe M	95	40	105	65	40	85	
aks-Badegurt mit Kopfstütze Flex, Größe L	100	43	110	70	45	88	
aks-Badegurt mit Kopfstütze Flex, Größe XL	110	45	110	85	50	92	
aks-Badegurt mit Kopfstütze Flex, Größe XXL	120	45	115	100	50	96	
aks-Aufrichtgurt (2 Einzelgurte), Größe M	110	17	-	-	-	-	
aks-Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe/~ zum Baden, Größe S	93	24	70	54/35	-	-	124
aks-Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe/~ zum Baden, Größe M	113	24	96	75/66	-	-	138
aks-Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe/~ zum Baden, Größe L	113	24	96	75/66	-	-	167
aks-Hygienegurt, Größe S	90	22	65	40	-		
aks-Hygienegurt, Größe M	97	22	71	44	-		
aks-Hygienegurt, Größe L	108	25	78	58	-		
aks-Hygienegurt, Größe XL	120	25	90	64	-		
aks-Hygienegurt, Größe XXL	130	27	110	74	-		
aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung, Größe S	86/29	24/36	65	38			
aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung, Größe M	96/33	26/40	69	47			
aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung, Größe L	107/34	28/40	75	51			
aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung, Größe XL	118/37	25/40	89	63			
aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung, Größe XXL	128/47	26/45	107	68			
aks-Komfort-Hygienegurt, Größe S	78	32	70	24	46		
aks-Komfort-Hygienegurt, Größe M	88	39	77	28	58		
aks-Komfort-Hygienegurt, Größe L	96	42	95	32	65		
aks-Komfort-Hygienegurt, Größe XL	105	45	105	40	69		
aks-Komfort-Hygienegurt, Größe XXL	115	45	120	49	73		
aks-Komfortgurt ~/aks-Komfortbadegurt mit integrierter Kopfstütze, Größe S	98	79	45	42	66		
aks-Komfortgurt ~/aks-Komfortbadegurt mit integrierter Kopfstütze, Größe M	122	89	46	46	74		
aks-Komfortgurt ~/aks-Komfortbadegurt mit integrierter Kopfstütze, Größe L	135	92	64	47	82		
aks-Komfortgurt ~/aks-Komfortbadegurt mit integrierter Kopfstütze, Größe XL	152	94	87	52	80		
aks-Komfortgurt ~/aks-Komfortbadegurt mit integrierter Kopfstütze, Größe XXL	164	100	108	56	70		
aks-Universal-Komfortgurt, Größe M	84	100	85	45	-		
aks-Universal-Komfortgurt, Größe L	110	109	109	71	-		
aks-Universal-Komfortgurt, Größe XL	128	116	131	90	-		
aks-Universal-Komfortgurt, Größe XXL	152	114	151	109	-		
aks-Universal-Netzgurt/aks-Universalgurt Flex, Größe S	110	126	107	56	-		
aks-Universal-Netzgurt/aks-Universalgurt Flex, Größe M	115	133	117	62	-		
aks-Universal-Netzgurt/aks-Universalgurt Flex, Größe L	130	140	129	68	-		
aks-Universal-Netzgurt/aks-Universalgurt Flex, Größe XL	145	145	144	83	-		
aks-Universal-Netzgurt/aks-Universalgurt Flex, Größe XXL	160	145	160	98	-		
aks-Liegendtransportgurt, Größe M	86	60	103	31	77		
aks-Liegendtransportgurt, Größe L	95	60	103	33	82		
aks-Liegendtransportgurt, Größe XL	105	65	108	35	87		
aks-Liegendtransportgurt, Größe XXL	115	65	108	37	95		
aks-Liegendtransportgurt f. T. mit 8-Punktaufnahme/~ zum Baden, Größe M	66	183	46	-	-		
aks-Liegendtransportgurt f. T. mit 8-Punktaufnahme/~ zum Baden, Größe L	75	189	66	-	-		
aks-Liegendtransportgurt f. T. mit 8-Punktaufnahme/~ zum Baden, Größe XL	85	189	76	-	-		
aks-Liegendtransportgurt f. T. mit 8-Punktaufnahme/~ zum Baden, Größe XXL	100	189	81	-	-		
goliath® Gurt, Größe A	112	68	94	50	70		
goliath® Gurt, Größe B	126	72	106	63	94		
goliath® Gurt, Größe C	140	76	120	78	102		



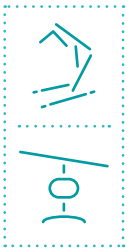





SCHNELLKURS
Liftergurt anlegen*




Aufnahme Sitzend

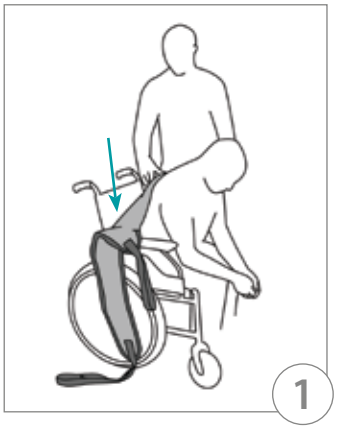

Rollstuhl bremsen. Patient mit Oberkörper nach vorne neigen, stützen Sie ihn dabei ab. Liftergurt mit dem Mittelteil soweit wie möglich unter das Gesäß des Patienten führen. Achten Sie darauf, dass die Beinstützen jeweils rechts und links von den Beinen verlaufen und nicht verdreht sind.

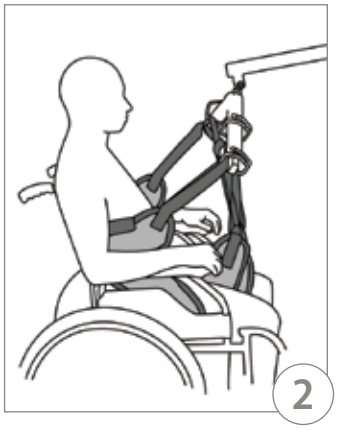


Fahren Sie den Lifter heran, die Rollen bleiben ungebremst. Beinstützen von außen nach innen unter den Oberschenkeln durchführen, sodass sie zwischen den Oberschenkeln liegen, achten Sie darauf, dass die Beinstützen gleich lang sind. Gurtschlaufen am Transportbügel richtig einhängen (s.S. 42f).

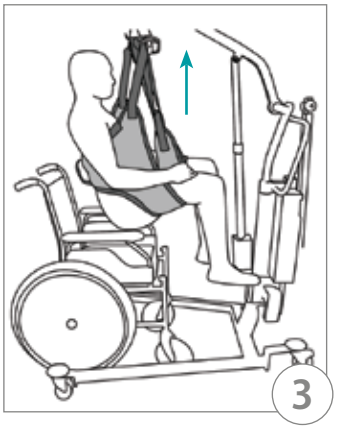


Kopf- und Beinschlaufen am Bügel jeweils parallel einhängen. Patient nur so hoch wie nötig anheben, achten Sie dabei auf die korrekte Sitzposition, notfalls absenken und korrigieren. Anschließend den Transfer so kurz wie möglich halten.


Aufnahme Liegend

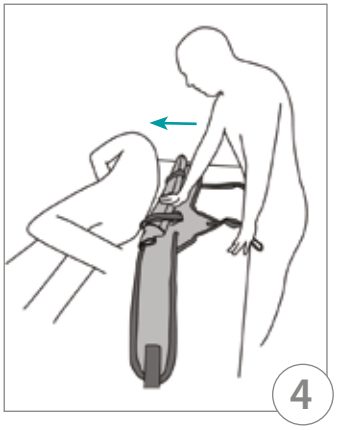

Bei einem Pflegebett: Liegefläche waagerecht, Rollen bremsen. Patient auf die Seite drehen und dabei stützen. Liftergurt längs in der Hälfte falten. Hinter den Patienten legen, so dass die Unterkante unterhalb des Gesäßes liegt. Drehen Sie den Patient auf die andere Seite, entfalten Sie den Gurt und ziehen Sie ihn glatt.

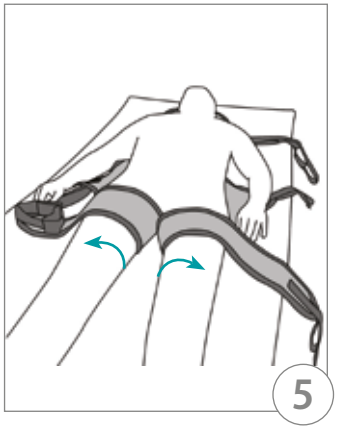

Drehen Sie den Patienten auf den Rücken und ordnen Sie die Beinstützen zwischen den Beinen des Patienten an. Achten Sie darauf, dass die Beinschlaufen gleich lang sind. Die Schulterschlaufen liegen im Bereich der rechten und linken Schulter, und die Kopfschlaufen (nicht bei allen Gurten vorhanden) oberhalb.

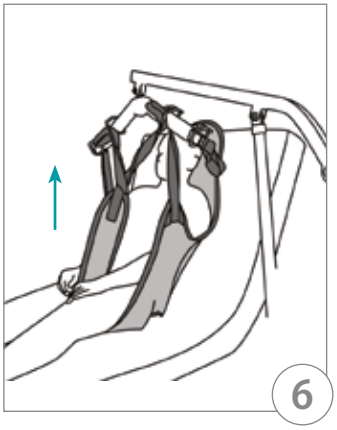

Fahren Sie den Lifter heran, die Rollen bleiben ungebremst. Gurtschlaufen richtig einhängen (s.S. 42f). Stellen Sie, wenn möglich, die Rückenlehne des Bettes aufrecht. Heben Sie den Patienten langsam an. Achten sie auf die Sitzposition, korrigieren Sie den Sitz des Gurtes, falls notwendig durch erneutes Absetzen.

* Ersetzt nicht das Lesen der Gebrauchsanweisung des Gurtes und Lifters!

Richtige und falsche Sitzposition erkennen*1



Der Patient sitzt aufrecht und etwas nach hinten gelehnt in einer entspannten Position. Zum Transportbügel wird eine angemessene Kopffreiheit eingehalten.

Die Linie von der Rückenpartie zum Gesäß und zu den Beinstützen ergibt in etwa einen rechten Winkel.

Die Unterkante des Liftergurtes liegt etwas unterhalb des Steißbeins und dient so als Auflage- und Stützfläche im Gesäßbereich.

Achten Sie darauf, dass der Patient so weit wie möglich im Gurt sitzt, auf diese Weise werden die Oberschenkel entlastet. Die Beinstützen befinden sich unter den Oberschenkeln und tragen die Hauptlast des Körpergewichtes.


Die Arme befinden sich innerhalb des Liftergurtes vor dem Körper und liegen auf den Oberschenkeln (Bild 7) oder je nach Gurt*2 liegt die Gurtoberkante unter den Achseln und die Hände greifen an die Schulterschlaufen (Bild 8).

Richtige Sitzposition






7

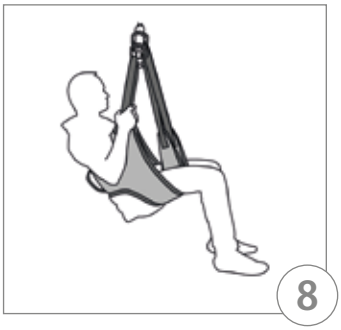

8

Senken Sie den Patienten ab, wenn Sie nach dem Anheben bemerken, dass der Patient eine falsche Sitzposition eingenommen hat. Stellen Sie die Ursache fest und beheben Sie diese.

Falsche Sitzposition

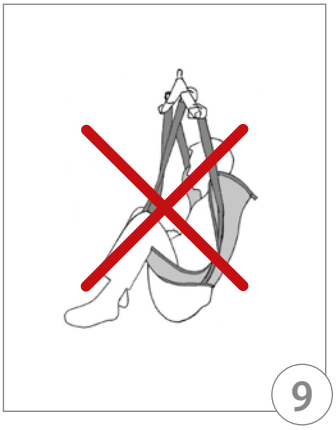

9

FALSCH:
Patient rutscht mit dem Gesäß durch.

URSACHE:
Der Liftergurt ist nicht richtig angelegt.

Der Liftergurt ist zu groß.




10

FALSCH:
Der Patient sitzt sehr eingeengt und sehr aufrecht.

Der Patient sitzt sehr nah vor dem Transportbügel.

Die Beinstützen befinden sich mehr beim Gesäß, als unter den Oberschenkeln und schneiden im Leistenbereich ein.

URSACHE:
Der Liftergurt ist zu klein.

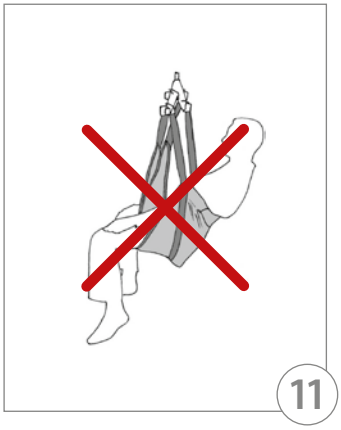

11

FALSCH:
Der Patient neigt nach hinten zu fallen.


URSACHE:
Die Beinschlaufen sind zu kurz eingehangen.

*1 Ersetzt nicht das Lesen der Gebrauchsanweisung des Gurtes und Lifters! *2 bei Hygienegurt/~m. Rckv., Aufrichtgurt, Schnelltranspg./~z. Baden

SCHNELLKURS
Liftergurt einhängen*



Bestand-teile Liftergurt

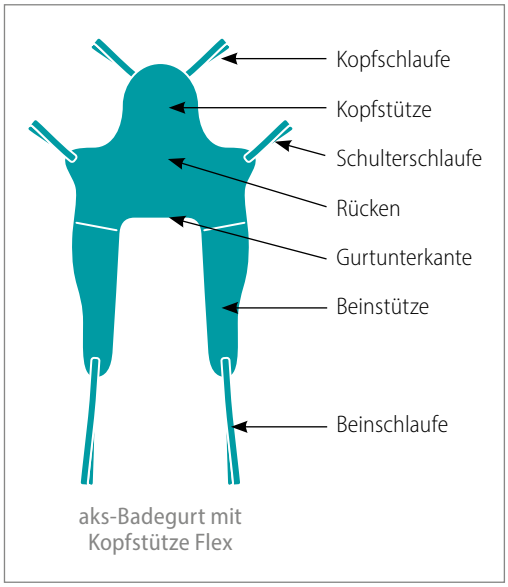

Begriffserklärung Bestandteile Liftergurt

Bestandteile eines Lifergurtes, exemplarisch an einem Gurtmodell.

Jede Schlaufe, also Kopf-, Schulter- und Beinschlaufen, besitzen mehrere Einhängemöglichkeiten/Positionen, die sich farblich unterscheiden, so dass sie schnell paarweise zugeordnet und eingehängt werden können.


Gurt-schlaufen



Gurtschlaufe hier mit drei unterschiedlichen Einhängemöglichkeiten/Positionen


Die Schlaufen des Liftergurtes können in unterschiedliche Positionen eingehängt werden, um die richtige Position für den Patienten zu erreichen. Beachten Sie die farbliche Kennzeichnung der Schlaufen und hängen Sie Gurtschlaufen-Paare in der gleichen Farbe und parallel an die gleiche Position des Lifterbügels ein.

Schlaufen am Lifterbügel richtig einhängen

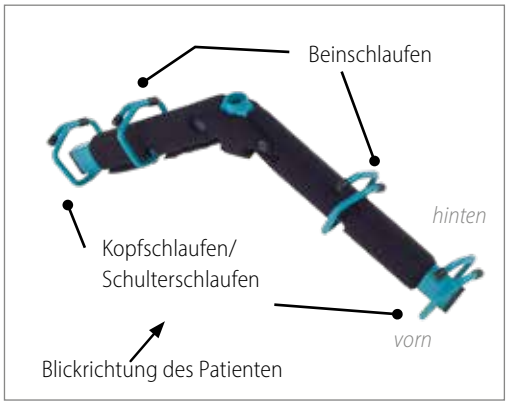

aks-Standardtransportbügel

Hängen Sie am Standardtransportbügel die Schlaufen-Paare parallel an die gleichen Haken, jeweils vorne oder hinten, von der Blickrichtung des Patienten aus betrachtet.

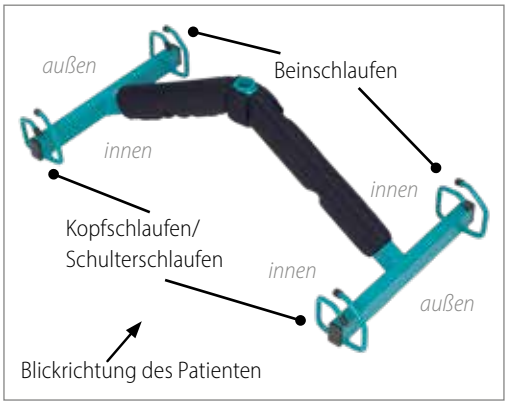

aks-Tandembügel/goliath® Komfortbügel

Beim Tandembügel/goliath® Komfortbügel benutzen Sie zum paarweisen Einhängen der Gurtschlaufen jeweils die innen oder außen liegenden Haken.


* Ersetzt nicht das Lesen der Gebrauchsanweisung des Gurtes und Lifters!

TIPPS*




Das Überkreuzen der Beinschlaufen bietet das Höchstmaß an Sicherheit für den Transport und verhindert, dass der Patient aus dem Liftergurt rutscht, das betrifft speziell Patienten mit Lähmungen unterhalb der Lendenwirbelsäule. Verfügt der Patient über ausreichend Stabilität und kann aktiv beim Hebevorgang mitwirken, besteht die Möglichkeit die Beinschlaufen parallel einzuhängen.

Beinschlaufen einhängen

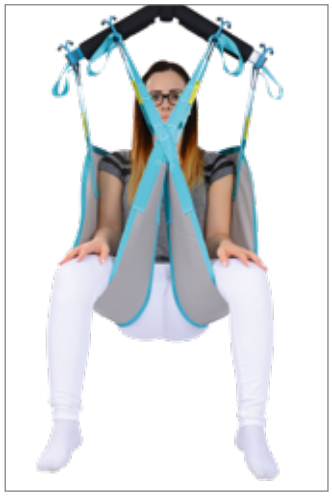

Beinschlaufen überkreuzt

Beinschlaufen überkreuzt eingehangen für eine geschlossene und stabilisierte Sitzposition.

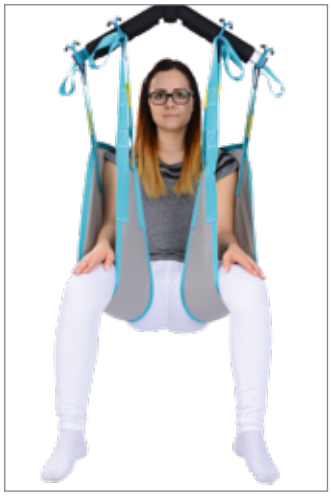

Beinschlaufen parallel

Beinschlaufen offen eingehangen für eine breitere und bewegliche Sitzposition.

Führen Sie den ersten Hebevorgang immer mit überkreuzten Beinschlaufen durch.

Aufnahme vom Boden

Gurt dem am Boden liegenden Patienten anlegen, siehe „Aufnahme Liegend", Seite 40, Bild 4-5.

Dann den Lifter kontrolliert von hinten an den Kopf heranfahren, darauf achten, dass der Patient ruhig liegt und der Kopf frei bleibt. **Jetzt den Lifter bremsen!**

Den Hebearm des fahrbaren Hebelifters ganz herunterfahren, dann die Gurtschlaufen wie gewohnt am Transportbügel einhängen.

Knien oder hocken Sie sich neben den Patienten und den Lifter, nutzen Sie die Handbedienung um den Lifter hoch zufahren und die freie Hand um den Patient im Gurt zu führen oder den Kopf zu unterstützen, bis die richtige Höhe erreicht ist um den Patienten zu transferieren.
Jetzt lösen Sie die Bremsen und geben die Rollen für den Transfer frei.



Bei der Aufnahme vom Boden, den Lifter kontrolliert hinter den Kopf des Patienten positionieren

* Ersetzt nicht das Lesen der Gebrauchsanweisung des Gurtes und Lifters!

Desinfektion und Aufbereitung von Medizinprodukten durch die aks pura GmbH – auch von Liftergurten!

HYGIENISCHE AUFBEREITUNG für den Wiedereinsatz

Als nach DIN EN ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen betreibt aks pura eine professionelle hygienische Aufbereitung unter Einhaltung der anwendbaren regulatorischen Anforderungen insbesondere an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten.



Wählen Sie mit **aks pura** die sichere Seite!

Zertifiziertes QM System

aks pura gmbh

Hygienische Aufbereitung von wiedereinsetzbaren Medizinprodukten insbesondere

Wechseldrucksystemen ✓
Schaumstoffmatratzen ✓
Sitzkissen ✓
Bezüge ✓
Hebegurte (Liftergurte: auf Wunsch mit Volllastprüfung in jeder Schlaufenposition) ✓

aks pura GmbH ■ Biberweg 18 ■ D-53842 Troisdorf ■ T +49 2241 9474-700 ■ pura@aks-pura.de ■ **www.aks-pura.de**

Bestellbogen für fahrbare Patientenlifter von aks

Fax an +49 2241 9474-88 oder E-Mail an aks@aks.de

Diesen Bestellbogen finden Sie in digitaler Form auf unserer Website unter service/downloads/formulare



Aufstehlifter, fahrbar ☐ 82112 **torneo® II** bis 150 kg ☐ 82121 **torneo® compact** bis 150 kg

Hebelifter, fahrbar *(ohne Transportbügel und Gurt)*



☐ 80115 **foldy® 130** bis 130 kg, Quarzgrau und Reinweiß
☐ 85011 **foldy® kid,** bis 130 kg, mehrfarbig
☐ 85012 **foldy® kid wählbar** bis 130 kg, Farbe/n individuell
☐ 80212 **foldy® micro** bis 130 kg, wasserblau
☐ 80111 **foldy® mini** bis 150 kg, wasserblau
☐ 80131 **foldy® e mini** bis 150 kg, wasserblau
☐ 80011 **foldy®** bis 150 kg, wasserblau
☐ 80031 **foldy® e** bis 150 kg, wasserblau

☐ 80311 **foldy® XL** bis 185 kg, wasserblau
☐ 80331 **foldy® e XL** bis 185 kg, wasserblau
☐ 83012 **clino® II** bis 150 kg, lichtgrau
☐ 83311 **clino® XL** bis 185 kg, lichtgrau
☐ 83331 **clino® e XL** bis 185 kg, lichtgrau
☐ 86031 + 89094 **goliath® inklusive Komfortbügel,** bis 250 kg

☐ 81011 **foldo®** bis 130 kg, wasserblau *schwenkbarer Hebelifter für den Einsatz an der Badewanne*
Verwenden Sie für die Bestellung eines foldo® unser Wannenmaßblatt! Die Wannenauflage und Auflageerhöhung müssen individuell auf die Badewanne des Patienten abgestimmt sein. Dazu benötigen Sie einen Standardtransportbügel oder Tandembügel.
*Das **Wannenmaßblatt** ist auf unserer Website unter service/downloads/formulare – oder QR-Code mit Smartphone scannen.*

Aufsteh- oder Hebelifter durch entsprechendes Zubehör, *2-in-1 Lifter*

☐ 87113 BASIS **dualo® mini** bis 150 kg, wasserblau
Aufstehlifter: ☐ 87082 Hebearm mini aktiv
☐ 87098 Trittbrett groß ☐ 87083 höhenverstellbares Trittbrett
Hebelifter: ☐ 87190 Hebearm mini standard, *zusätzlich wird ein Transportbügel benötigt, s.u.*

☐ 87012 BASIS **dualo®** bis 150 kg, wasserblau
Aufstehlifter: ☐ 87081 Hebearm aktiv smart ☐ 87099 Hebearm aktiv
☐ 87098 Trittbrett groß ☐ 87083 höhenverstellbares Trittbrett
Hebelifter: ☐ 87090 Hebearm standard, *zusätzlich wird ein Transportbügel benötigt, s.u.*

☐ 87312 BASIS **dualo® XL** bis 185 kg, lichtgrau
☐ 87332 BASIS **dualo® e XL** bis 185 kg, lichtgrau – *mit elektrischer Spreizung des Fahrgestells*
Aufstehlifter: ☐ 87313 Hebearm XL aktiv smart ☐ 87316 Hebearm XL aktiv *(für große Personen)*
☐ 87315 Trittbrett groß ☐ 87317 höhenverstellbares Trittbrett
Hebelifter: ☐ 87390 Hebearm XL standard, *zusätzlich wird ein Transportbügel benötigt, s.u.*

Zubehör für Hebelifter, fahrbar

Standardtransportbügel, bis 130 kg	☐ 89445 in Reinweiß	☐ 89447 in Zinkgelb	☐ 89456 wählbar
mit Bügelpolster	☐ 89449 in Reinweiß	☐ 89451 in Zinkgelb	☐ 89458 wählbar
Standardtransportbügel, wasserblau	☐ 89139 bis 130 kg	☐ 79720 bis 150 kg	☐ 89242 bis 185 kg
Standardtransportbügel, lichtgrau	☐ 89137 bis 150 kg	☐ 89253 bis 185 kg	
Tandembügel, bis 130 kg	☐ 89446 in Reinweiß	☐ 89448 in Zinkgelb	☐ 89457 wählbar
mit Bügelpolster	☐ 89450 in Reinweiß	☐ 89452 in Zinkgelb	☐ 89459 wählbar
Tandembügel, wasserblau	☐ 89190 bis 130 kg	☐ 79721 bis 150 kg	☐ 89243 bis 185 kg
Tandembügel, lichtgrau	☐ 89138 bis 150 kg	☐ 89254 bis 185 kg	
Liegendtransportbügel m. 8-Pkt.-Aufnahme*, wasserblau		☐ 89023 bis 150 kg	☐ 89270 bis 185 kg
Liegendtransportb. m. 8-Pkt.-Aufn.*, lichtgrau	☐ 89173 bis 150 kg	☐ 89269 bis 185 kg	☐ 89298 bis 250 kg

Waage ☐ 89016 **aks-dw 150** bis 150 kg ☐ 89157 **aks-efw 200** bis 200 kg ☐ 89158 **aks-efw 300** bis 300 kg

Deckenlift-Anlagen – *auf Anfrage*

* Dieser Transportbügel ist nicht an foldy® 130/kid/kid wählbar/micro/mini, foldo® und dualo® mini verwendbar!

Bestellbogen für aks-Liftergurte

Fax an +49 2241 9474-88 oder E-Mail an aks@aks.de



Aufrichtgurt mit Brustschlaufe	☐ 88781 **S**	☐ 88782 **M**	☐ 88783 **L**	☐ 88784 **XL**	☐ 88785 **XXL**
Wadengurt	☐ 88806				
Aufrichtgurt m. Brustschl. u. Sitzschaukel	☐ 88800 **S**	☐ 88801 **M**	☐ 88802 **L**	☐ 88803 **XL**	☐ 88804 **XXL**
Ersatz **Sitzschaukel** ☐ 88805	*Ersatz* **Wadenband** ☐ 88810				



Standardgurt	☐ 88700 **S**	☐ 88701 **M**	☐ 88702 **L**	☐ 88703 **XL**	☐ 88704 **XXL**
Badegurt	☐ 88715 **S**	☐ 88716 **M**	☐ 88717 **L**	☐ 88718 **XL**	☐ 88719 **XXL**
Standardgurt m. Rckverst. u. int. Kpfst.	☐ 88705 **S**	☐ 88706 **M**	☐ 88707 **L**		
Badegurt m. Rckverst. u. int. Kpfst.	☐ 88720 **S**	☐ 88721 **M**	☐ 88722 **L**		
Komfortgurt m. int. Kopfstütze	☐ 88710 **S**	☐ 88711 **M**	☐ 88712 **L**	☐ 88713 **XL**	☐ 88714 **XXL**
Komfortbadegurt m. int. Kopfstütze	☐ 88725 **S**	☐ 88726 **M**	☐ 88727 **L**	☐ 88728 **XL**	☐ 88729 **XXL**
Badegurt mit Kopfstütze Flex	☐ 88791 **S**	☐ 88792 **M**	☐ 88793 **L**	☐ 88794 **XL**	☐ 88795 **XXL**
Aufrichtgurt (2 Einzelgurte)		☐ 88765 **M**			
Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe	☐ 88740 **S**	☐ 88741 **M**	☐ 88742 **L**		
Schnelltransp. m. Brustschl. z. Baden	☐ 88771 **S**	☐ 88772 **M**	☐ 88773 **L**		
Hygienegurt	☐ 88730 **S**	☐ 88731 **M**	☐ 88732 **L**	☐ 88733 **XL**	☐ 88734 **XXL**
Hygienegurt mit Rückenverstärkung	☐ 88786 **S**	☐ 88787 **M**	☐ 88788 **L**	☐ 88789 **XL**	☐ 88790 **XXL**
Komfort-Hygienegurt	☐ 88735 **S**	☐ 88736 **M**	☐ 88737 **L**	☐ 88738 **XL**	☐ 88739 **XXL**
Universal-Komfortgurt		☐ 88756 **M**	☐ 88757 **L**	☐ 88758 **XL**	☐ 88759 **XXL**
Universal-Netzgurt	☐ 88760 **S**	☐ 88761 **M**	☐ 88762 **L**	☐ 88763 **XL**	☐ 88764 **XXL**
Universalgurt Flex	☐ 88766 **S**	☐ 88767 **M**	☐ 88768 **L**	☐ 88769 **XL**	☐ 88770 **XXL**
Liegendtransportgurt		☐ 88746 **M**	☐ 88747 **L**	☐ 88748 **XL**	☐ 88749 **XXL**
Liegendtransportgurt f. 8-Pkt-Aufn.		☐ 88751 **M**	☐ 88752 **L**	☐ 88753 **XL**	☐ 88754 **XXL**
Liegendtransportgurt f. 8-Pkt-Aufn. z. Baden		☐ 88777 **M**	☐ 88778 **L**	☐ 88779 **XL**	☐ 88780 **XXL**
goliath® Gurt *für die bariatrische Pflege*			☐ 88807 **A**	☐ 88808 **B**	☐ 88809 **C**

☐ 88796 **Verlängerungsschlaufen 24 cm,** VPE 2 Stück, Menge _____ VPE

☐ 88798 **Kopfstütze** *für Standardgurt, Badegurt, Komfort-Hygienegurt, Liegendtransportgurt /~ f. 8-Pkt.- /~ zum Baden, goliath® Gurt*

Abrechnungspositionsnummer für Gurtsysteme: 22.40.04.0001

Angebot/Lieferung an:

Name/Vorname .....

.....

Firma/Fachhandel/Kundennummer .....

.....

.....

Kommission .....

.....

Datum .....

Ort .....

Unterschrift .....

aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH
Antwerpener Str. 6 | D-53842 Troisdorf | Telefon +49 2241 9474-0 | Fax +49 2241 9474-88 | aks@aks.de | **www.aks.de**

aks BV, Belgien
Grotestraat 314 | B-3850 Nieuwerkerken | Telefon +32 11 748382 | info.aksbv@aks.de | **www.aksbv.be**

Stand: 10/2026 – Wir behalten uns Änderungen unserer Produkte sowie Farbabweichungen und Druckfehler vor.

Passende Hilfsmittel einsetzen.

foldo®
Der Hebelifter mit Schwenkfunktion



Sehen Sie den Transfer vom Rollstuhl
in die Badewanne
mit foldo® und aks-Badegurt .







Hilfsmittel für die Pflege

- Patientenlifter
- Deckenlift-Anlagen
- Transferhilfen
- Pflegebetten
- Antidekubitus Produkte:
  Wechseldrucksysteme
  Schaumstoffmatratzen
  Sitzkissen
- XXL-Produkte/bariatrische Pflege

Stand: 10/2026 – Wir behalten uns Änderungen unserer Produkte sowie Farbabweichungen und Druckfehler vor.

Folgen Sie uns:
@aks_gmbH
#aksgmbhtroisdorf

aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH
Antwerpener Str. 6 | D-53842 Troisdorf | Telefon +49 2241 9474-0 | Fax +49 2241 9474-88 | aks@aks.de | **www.aks.de**

aks BV, Belgien
Grotestraat 314 | B-3850 Nieuwerkerken | Telefon +32 11 748382 | info.aksbv@aks.de | **www.aksbv.be**

aks pura GmbH
Biberweg 18 | D-53842 Troisdorf | Telefon +49 2241 9474-700 | Fax +49 2241 9474-788 | pura@aks-pura.de | **www.aks-pura.de**

Horcher GmbH
Philipp-Reis-Straße 3 | D-61130 Nidderau |Telefon +49 6187 9204-0 | Fax +49 6187 9204-15 | office@horcher.com | **www.horcher.com**

Unternehmen der gemeinnützigen Stiftung **EIN HERZ LACHT** | **www.einherzlacht.org**